



ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM

PVC ASPIRASYON SONDASI

- Toksik olmayan, tahriş etmeyen PVCden üretilmiştir.
- Distal uç açıktır ve aspirasyon sırasında travmadan kaçınmak için bir yan gözü vardır.
- Proksimal uç, standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuştur.
- Endobronşial aspirasyon için uygundur.
- Pürüzlerden arındırılmış ekstra düz yüzeyi kolay giriş sağlar.
- Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlandırılmıştır.
- Parmak Kontrol Valfli modeli de mevcuttur.
- Sterildir, tek kullanımlıktır, Pirojenik değildir.

ÖLÇÜLER										
FR	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Renk Kodu	Gri	Yeşil	Mavi	Siyah	Beyaz	Yeşil	Turuncu	Kırmızı	Sarı	Menekşe

PVC ASPIRATION CATHETER

- Non-toxic, non-irritant is manufactured from PVC.
- Distal end is open and to avoid trauma during aspiration has a side eye.
- The proximal end to be connected easily to the standard aspiration equipment manufactured is attached to a connector.
- Suitable for endobronchial aspiration.
- Extra flat surface free from roughness provides easy entry.
- Numbers are coded with colors to easily distinguish.
- Finger Control Valve model is also available.
- Sterile, single use, is not pyrogenic.

SIZES										
FR	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Colour Code	Grey	Green	Blue	Black	White	Green	Orange	Red	Yellow	Violet



ENDOTRAKEAL TÜP KAFSIZ / KAFLI / KAFLI SİRALLİ

Endotrakeal tüpler, trakede oral ve nasal hava akışını sağlamak için üretilmişlerdir.

Kaflı entübasyon tüpleri, Yüksek Hacimli Düşük Basınç Kaflı, intermediate HVLP olarak veya Standard Düşük Basınç Kaflı, hepsi ekinde pilot balon bulunan tek yönlü luer-lock valfidirler.


- PVC malzemeden imal edilmiştir, lateks/kauçuk içermez
- Gövde üzerinde derinlik işaretleri
- Radyopak çizgi
- Atravmatik yuvarlatılmış distal uç
- Distal uçta Murphy gözü
- Balonlu modellerde yüksek hacim/düşük basınç balon ve valfli pilot balonu
- Evrensel proksimal konnektör
- Balonlu, balonsuz ve çelik spiralli balonlu modeller
- 2,0 – 9,0 mm arası iç çap seçenekleri

CUFFED / REINFORCED / UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE

Endotracheal tubes, trachea, oral and nasal airflow are built to provide.

Cuffed intubation tubes, High Volume Low Pressure Cuffed, intermediate or Standard Low Pressure Cuffed as HVLP, all located in the annex pilot balloons are one-way luer-lock valve.

- Are made of PVC, latex / rubber-free
- Depth markings on the body
- The radiopaque line
- Atraumatic rounded distal tip
- Murphy eye on the distal end
- Bubble models high volume / low pressure balloon and the balloon valve
- Universal proximal connector
- Tires, and steel spiral balloon models without them
- 2.0 to 9.0 mm internal diameter options

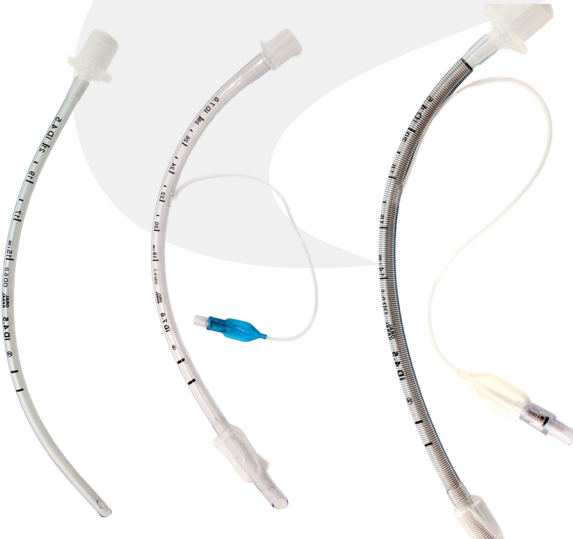

ENDOTRAKEAL TÜP STİLESİ

Bükülebilir, kütleştirilmiş uçlu metalden yapılmış ve üzeri plastik ile kaplanmıştır.



ENDOTRACHEAL TUBE STYLET

Bendable, have blunted tip is made of metal coated with plastic and above.

LATEKS VE SİLİKON PENROZ DREN

- Lateks ve silikon
- Steril paket
- Düzgün hortum iç ve dış yüzeyi
- Kolay açılabilen tekli ambalajlarda



LATEX AND SILICONE PENROSE DRAIN

- Latex and silicone
- Steril packing
- Smooth inner and outer surfaces of the tube
- Easy to be switched in a single package

LARENGEAL MASKE TEK/ÇOK KULLANIMLIK

Larengeal maske, hipofarenksin şekline uygun ve larinks bir conta gibi kapatan minyatür bir silikon maske ve buna 30 derecelik açı ile birleştirilmiş silikon tüpten oluşur. Larengeal maskenin gövdesini oluşturan duvarı boyunca, radyolojik kontrol amacı ile kullanılan ve oryantasyonda yararlı olan radio-opak çizgi vardır. Çok defa Steril edilebilen ve tek kullanımlık modelleri mevcuttur. Çok kullanımlı olan model 40 defa steril edilip kullanılabilir.




LARENGEAL MASKE TEK/ÇOK KULLANIMLIK

Laryngeal mask, get hipofarenk conform to the shape and larynx closes like a miniature silicone mask seal and it is made from silicone tubing combined with a 30-degree angle. Along the walls forming the body of a laryngeal mask, which is used for controlling purposes and radiological orientation lines are useful in the radio-opaque. Many times that can be sterilized and disposable versions are available. Whether that model can be used for multi-use sterile 40 times.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ

Düşüş basınçlı kaf, X-Ray opak çizgisi.

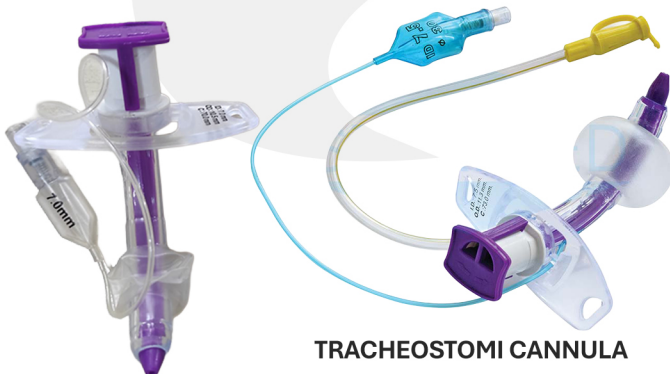

TRACHEOSTOMI CANNULA

Low-pressure cuff, X-Ray opaque line.

LATEKS T-DREN

- Doğal lateksten üretilmiştir.
- Sterildir, toksit içermez
- Tek kullanımlık




LATEX T-DRAIN

- Made of natural latex material
- It is sterile, does not contain toxic
- Disposable

PEZZER SONDA (MALECOT KATATER)

- Üretra dar ve drenaj tüpü yerleştirilemiyorsa, Pezzer Katater, drenaj amaçlı fistula yapmak için kullanılır.
- Cerrahi olarak müdahale edilen bölgeden alt abdomenden mesaneye yerleştirilerek drenaj gerçekleştirilir.
- Her kataterin uç kısmında üç boşaltma gözü bulunur.
- Kataterler iki ayrı soyulabilir pakette iç içe paketlenmiş ve sterilize edilmiştir.
- İç paket katetere yapışmayan polietilenden, dış paket bir tarafı medikal folyo, bir tarafı medikal kağıttan yapılmıştır.

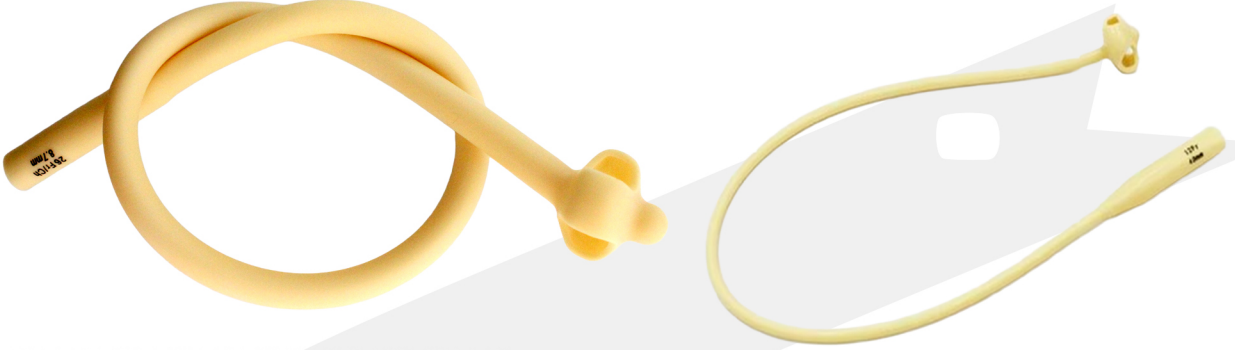


PEZZER CATEHETER (MALECOT CATHETER)

- If the urethra is narrow and drainage tube can not be inserted, Pezzer Catheter is used to make a fistula to drainage purpose.
- Three evacuation points at the end of the catheter
- Sterilized and protected with a double packing, the internal packing is polyethylene pouch which does not stick to the catheter and external packing is made of medical folio on one side and medical paper on the other side.

SİLİKON DÜZ DREN

- %100 medikal sınıf silikon yüksek biyo-uyumluluk sağlar
- X-Ray opaktır.
- Yumuşak ve kıvrılma engelleyici yapı, bükülme, tıkanma ve kıvrılmaları engeller.
- Temiz ve saydam bağlama hortumu, drenaj gözle takibini sağlar.
- 2 perferasyon tipinde, 4 boyda mevcuttur.
- İkili steril paket içerisinde.
- Düz dren kite önceden ekli trokar ile beraberdir.

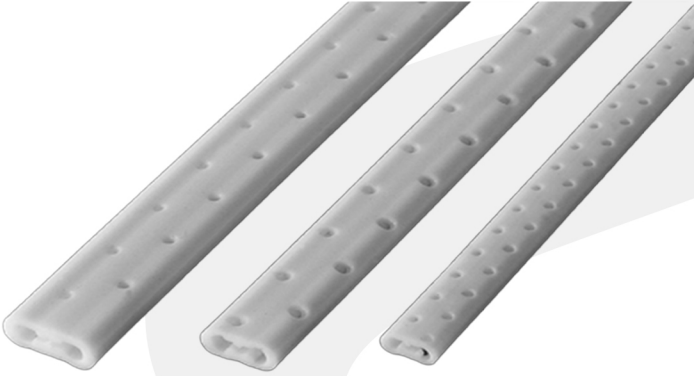

SILICONE FLAT DRAIN

- 100% medical grade silicone for superior biocompatibility.
- X-Ray opaque effectiveness.
- Soft yet kink-resistant structure to minimize clog or obstruct.
- Clear connecting tube provides inspection and drainage visibility.
- Available with sizes, perforations types.
- Sterilized double package.
- Available with pre-connected Trocar: Flat Drain Kit.

JACKSON-PRATT SİLİKON REZERVUAR (BOMBA TİPİ) (100cc / 150cc / 200cc / 400cc)

- Biyo uyumluluk için %100 medikal sınıf silikon.
- Düşük basınçlı dizayn devamlı nazik vakum sağlar ve doku travmasını minimize eder.
- Hacim işaretleri kolay ölçüm yapmayı sağlar.
- Yüzeylerin üzerine kolay oturtmak için alt tarafları düz olarak dizayn edilmiştir.
- Güvenli bağlama için asacak ve yatak yanı klipi.
- 4 boyda ve 2 çıkış yönünde mevcuttur.
- 200 ve 400cc modellerde 2.tüpe bağlantı için opsiyonel ekstra giriş mevcuttur.
- Alt çıkışlı modeller toplama torbasına bağlanabilir.
- İkili steril paketler içerisinde.



JACKSON-PRATT SILICONE RESERVOIR (BOMP TYPE) (100cc / 150cc / 200cc / 400cc)


- Made of bio compatible medical grade 100% silicone.
- Low pressure design continuously provide soft vacuum to minimize the tissue trauma.
- Volume indicators for easy measuring.
- Down side flat designed to allow easy set.
- Hooks for bed or suspensor ties.
- Available in 4 dimensions and in 2ways.
- Available in 200 and 400 cc models. Optionnal 2nd tube connection.
- Reservoir can be connected to down side exit models.
- Double sterile pack.

KAPALI ASPİRASYON SİSTEMİ

Mekanik olarak ventile edilen hastalarda aspirasyon sırasında ventilasyon ve oksijen tedavisini sürdürmek için kullanılır.

- Ventilatör ilişkili Pnömoni (VAP) riskini en aza indirir.
- Toksik olmayan, tıbbi sınıf PVC'den üretilmiştir.
- Maksimum hasta konforu için yanal gözlere, pürüzsüz uca ve derinlik işaretlerine sahip kateter.
- MDI portu etkili, hızlı ve uygun bir ilaç dağıtım yolu sağlar.
- Tek yönlü valfli irigasyon portu, emme kateterinin lavajına ve irigasyonuna izin verir.
- Açma/kapama valfi emme kateterinin ucunun izole edilmesini sağlar ve kapalı bir temizleme odası oluşturur. Solunum yoluna sıvı girme riski yoktur.
- Şeffaf konektörler ve dayanıklı kılıf kateterin manipülasyonunu kolaylaştırır, kan ve balgamin içeri sızmasını önler.
- 360° dönebilen dirsek, daha fazla hasta konforu için dönüş sağlar ve torku azaltır.
- ET Tüpünün kateterden kolayca çıkarılması için kama.
- Daha fazla rahatlık için Flexi-mount konektör.

Boyutlar						
Boyut	6 Fr.	8 Fr.	10 Fr.	12 Fr.	14 Fr.	16 Fr.
Dış Çap (mm)	2.0	2.7	3.3	4.0	4.7	5.3
İ.Ç. (mm)	1.4	1.8	2.4	2.8	3.2	3.8
Uzunluk (mm)	300	300	600	600	600	600
Renk Kodu	Deniz Yeşili	Mavi	Siyah	Beyaz	Yeşil	Turuncu

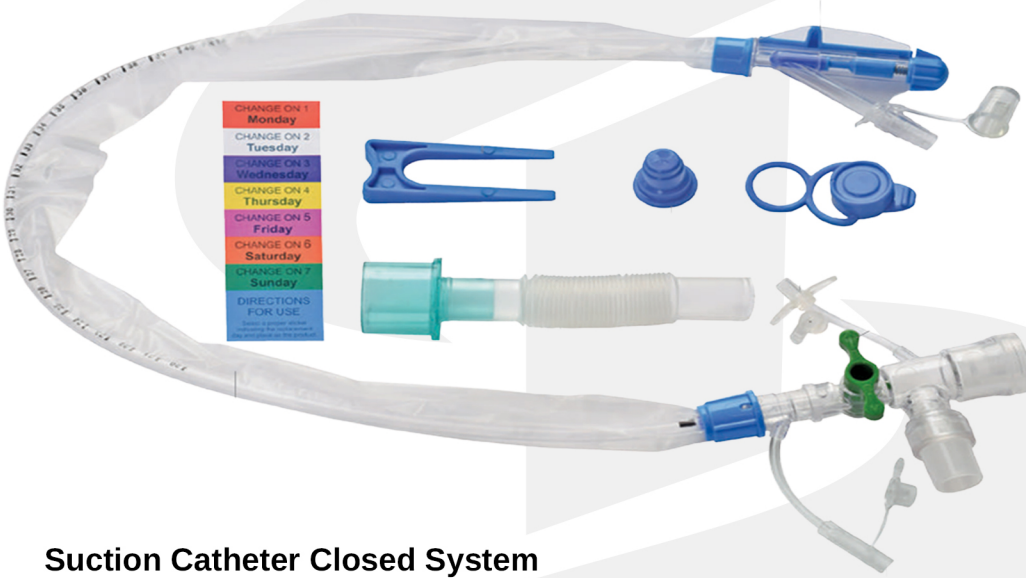

Suction Catheter Closed System

Used to maintain ventilation and oxygen therapy during aspiration in mechanically ventilated patients.

- Minimizes the risk of Ventilator-Associated Pneumonia (VAP).
- Made from non-toxic, medical-grade PVC.
- Catheter features lateral eyes, a smooth tip, and depth markings for maximum patient comfort.
- The MDI port provides an effective, fast, and convenient route for drug delivery.
- The irrigation port with a one-way valve allows for lavage and irrigation of the suction catheter.
- The open/close valve isolates the tip of the suction catheter and creates a closed cleaning chamber. There is no risk of fluid entering the airway.
- Transparent connectors and a durable sheath facilitate catheter manipulation and prevent blood and sputum from leaking inside.
- The 360° rotatable elbow provides rotation for greater patient comfort and reduces torque.
- Wedge for easy removal of the ET Tube from the catheter.
- Flexi-mount connector for added comfort.

SIZES						
Size	6 Fr.	8 Fr.	10 Fr.	12 Fr.	14 Fr.	16 Fr.
O.D. (mm)	2.0	2.7	3.3	4.0	4.7	5.3
I.D. (mm)	1.4	1.8	2.4	2.8	3.2	3.8
Length (mm)	300	300	600	600	600	600
Color Code	Sea Green	Blue	Black	White	Green	Orange

SPİNAL VE EPİDURAL İĞNE (SPINAL AND EPIDURAL NEEDLES)

Spinal iğne ve plastik tutturma kanatları / Spinal needle and plastic fastening wings.



Ürün / Product

- *Spinal iğne quincke kesim uç /needle bevel quincke
- *Spinal iğne / needle pencil point
- *Epidural iğne/needle

Boy/Size


- 18G, 20G, 22G, 25G, 26G, 27G
- 22G, 25G, 26G, 27G
- 16G, 18G



TEK KULLANIMLIK EL KONTROLLÜ STERİL CERRAHİ KOTER KALEMİ

Yüksek radio frekansları kullanarak kesme ve yakma işlemi gerçekleştirir.

- İki kontrol düğmesi
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik elektrot bıçağı
- 170mm-ABS kalem görünüşü
- PVC medikal kablo ve 3 iğneli fiş
- Paketleme:100 adet/Koli
- En fazla çıkış akımı:1A
- Tanımlanan Frekans:0-1.0MHZ
- Direnç:200Ω
- Sterilizasyon Tekniği: Sterile EO

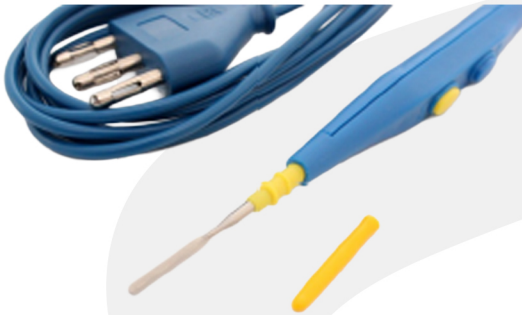

SINGLE USE HAND CONTROLLED STERILE SURGERY KOTER PEN

Using radio high frequencies for cutting and burning process.

- 2 control buttons
- Removable stainless steel electrode knife
- 170mm-ABS pen aspect
- PVC medical cable and 3 needles plug
- Packaging:100 Pcs/Box
- Maximum Output: 1A
- Defined Frequency: 0-1.0MHZ
- Resistanceç:200Ω
- Sterilisation process: Sterile EO

ÇOK KULLANIMLIK EL KONTROLLÜ CERRAHİ KOTER KALEMİ

- İki kontrol düğmesi
- Çıkarılabilir ve değiştirilebilir paslanmaz çelik elektrot bıçağı
- 3,5 metre uzunluğunda PVC medikal kablo ve 3 iğneli fiş
- Paketleme:100 adet/Koli



MULTIPLE USE HAND CONTROLLED SURGERY KOTER PEN

- 2 control buttons
- Removable Stainless steel electrode knife
- 3,5 meter length PVC medical cable and 3 needles plug
- Packaging: 100 pcs/Box

TEK KULLANIMLIK KOTER UCU ÇEŞİTLERİ



STERİL KOTER ZIMPARASI (STERILE CAUTERY SANDER)



DISPOSABLE ELECTROSURGICAL ELECTRODES

- Loop
- Needle
- Blade

BİPOLAR (ÇİFTLİ) VE MONOPOLAR (TEKLİ), YETİŞKİN/ÇOCUK TEK KULLANIMLIK KOTER TOPRAKLAMA PLAKLARI

- Doğal elektrottur ve yüksek frekanslı elektrik akımlı elektrocerrahi jeneratör için geri dönüş pedi olarak kullanılır.
- Elektrocerrahi etkisi yoktur.

MONOPOLAR (SINGLE) AND BIPOLAR (DOUBLE) ELECTROSURGICAL GROUNDING PLATE, ADULT/CHILD

- It's natural electrode and used as recycling pad for high frequency electrical current electrosurgery generator.
- Has no electrosurgery effect.



BİSTURİ UCU / KARBON ÇELİK

- Karbon çelikten üretim, yüksek kalite
 - Tek kullanımlık
 - Farklı cerrahi müdahalelere uygun
 - Steril
 - Travma oluşturmayan (atravmatik)
 - Tekli blister ambalajda / 100'lü kutuda
- Boyutlar : 10,11,12,15,18,20-21,22,23

CARBON STEEL SURGICAL BLADE

- Made of high quality carbon steel
- Disposable



- Sterilized
 - Atraumatic
 - Single blister pack / Pack quantity:100pcs
- Sizes:10,11,12,15,18,20,21,22,23,24






ENTERAL BESLENME

PVC LEVİN SONDA

- Katater üzerindeki Radio-opak çizgi, radiolojik olarak kontrol edildiğinde kataterin pozisyonunun belirlenmesini, böylece doğru konumlanmasını sağlar.
- Distal uç konikleştirilmiştir ve dört yan gözü vardır.
- Proksimal uç standart aspirasyon ve başka amaçlı cihazlara bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuştur.
- Medikal PVC, burundan boşalmalara engel olur.
- Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlandırılmıştır.
- Katater ucundan başlayarak, tam yerleştirmeyi sağlamak için derecelendirilmiştir.
- Sterildir, tek kullanımlıktır, toksit-pirojenik değildir.

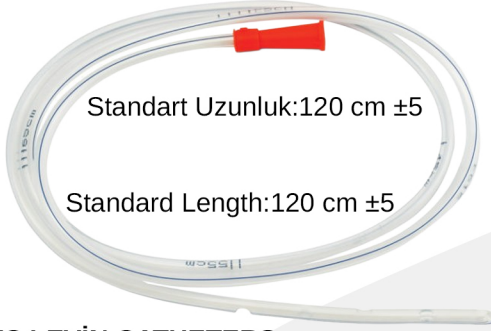

Standart Uzunluk:120 cm $\pm$ 5

Standard Length:120 cm $\pm$ 5

ÖLÇÜ

FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Renk Kodu	Yeşil	Mavi	Siyah	Beyaz	Yeşil	Turuncu	Kırmızı	Sarı

SIZES

FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Colour Code	Green	Blue	Black	White	Green	Orange	Red	Yellow


PVC LEVİN CATHETERS

- Radio Opaque line on the catheter permits an adequate positionning thru a radiological control.
- Distal end is in conical form and there are four side compartments
- Proximal end, is tied to a connector which is manufactured for easily connection to any standard aspiration and other purposed equipments.
- Medical PVC avoid drain off from the noise.
- Color codes are used for a clear differentiation of numbers.
- Graduation marks are available on the catheter,for a clear positionning.
- It is sterile,single use disposable,non toxic and non pyrogenous.

PVC BESLENME SONDASI

- X-Ray altında görüntü alabilmek için radio-opak çizgi katater boyunca uzatılmıştır.
- Toksik olmayan, tahris etmeyen medikal PVC'den üretilmiştir.
- Distal uç konik hale getirilmiş ve iki yan gözü vardır.
- Proksimal uç luer olarak beleme şırıngasına veya hunisine bağlanmak üzere dizayn edilmiştir.
- Yumuşak ve yuvarlatılmış uç, uygulama sırasında travma oluşumuna engel olur.
- Kataterin istenen pozisyonda yerleştirilmesini sağlamak için gövdenin üzerine derece çizgileri konulmuştur.
- Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlandırılmıştır.
- Sterildir, Toksik-Pirojenik değildir.


ÖLÇÜLER						
FR	5	6	7	8	9	10
Renk Kodu	Gri	Yeşil	Beyaz	Mavi	Turuncu	Siyah

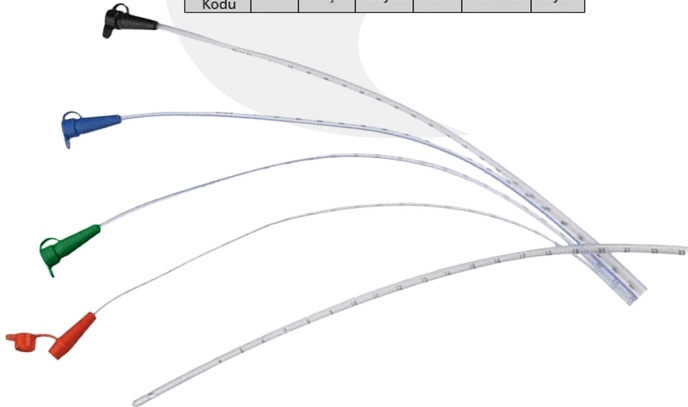

PVC FEEDING CATHETER


- There is a radio opaque line along the cathether for a visualisation under X- rays.
- Made from non toxic and non irritant PVC material.
- Distal end is in conical form and there are two side compartments
- Proximal end in luer has been designed to be easily connected to the feeding syringe or cone
- Soft and rounded end to avoid trauma during application.
- Graduation marks are available on the catheter,for a clear positionning.
- Color codes are used for a clear differentiation of numbers.
- It is sterile,non toxic and non pyrogenous.

SIZES						
FR	5	6	7	8	9	10
Colour Code	Grey	Green	White	Blue	Orange	Black

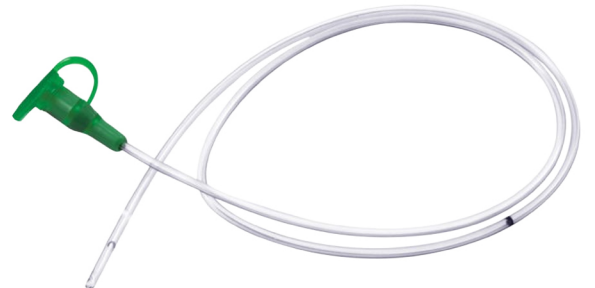


SİLİKON BESLENME SONDASI

- Üstün biyo-uyumluluk için %100 tıbbi silikon
- Uygun yumuşaklık ve gelişmiş hasta konforu için mükemmel esneklik
- Kolay yerleştirilmesi için konik uç
- Pozisyon takibi için işaretleme derinlik
- Güvenli sızdırmazlık için fiş
- Çift sterilize ambalaj

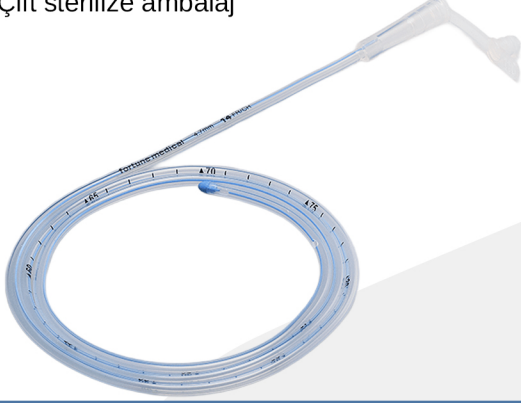


SILICONE FEEDING CATHETER

- 100% medical grade silicone for superior biocompatibility.
- Proper softness and excellent flexibility for enhanced patient comfort.
- Tapered tip for easy insertion
- Depth marking for position confirmation.
- Attached plug for secured sealing.
- Double sterilized packaging.

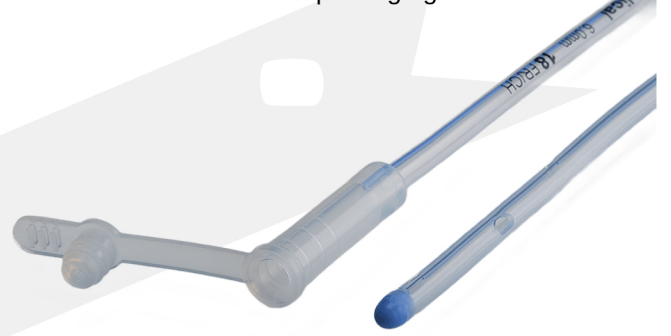

ENTERAL BESLENME TÜPÜ

- Poliüretandan üretilmiştir. Lateks, DEHP içermez.
- Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir.
- Enteral Beslenme tüpleri, nazogastrik veya nazoenterik yol ile aralıklı veya sürekli tüp beslemesi gerektiren hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kılavuz tel ile birlikte.
- Tek kullanımlıktır.
- Kısadönemli kullanım (30 gün) için tasarlanmıştır.
- 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr ve 16Fr boyutlarında mevcuttur.

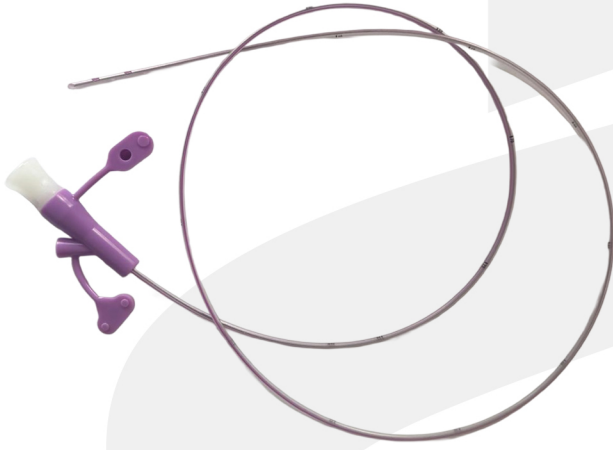

ENTERAL FEEDING TUBE

- Made of polyurethane. Does not contain Latex, DEHP.
- Sterilized with Ethylene Oxide.
- Intended for use in patients requiring intermittent or continuous tube feeding via the nasogastric or nasoenteric route.
- With guide wire.
- Single use only.
- Designed for short-term use (30 days).
- Available in 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr and 16Fr sizes.

GASTROSTOMİ TÜPÜ - PEG REPLASMAN TÜPÜ

Ağız yolu ile beslenemeyen hastaların PEG setinden sonra kullandıkları %100 silikondan imal edilen beslenme tüpüdür.

- X-Ray opak çizgi
- 12-14 FR balon 5ml şişirme kapasitesi
- 16-24 FR balon 20ml şişirme kapasitesi
- Paket içeriğinde kayganlaştırıcı jel, mamanın geriye akışını engelleyici klemp ve girişi kolaylaştırıcı plastik kılavuz tel bulunmaktadır.
- 12-14-16-18-20-22 ve 24 FR boyutlarında mevcuttur.



GASTROSTOMY TUBE PEG REPLESMAN TUBE

The product is made of 100% silicone tube. It is suitable for the patients who cannot feed orally. The product is used after PEG Kit.

- X-Ray Opaque Line
- 12-14 FR balloon with 5ml inflation capacity
- 16-24 FR balloon with 20ml inflation capacity
- Package Content; lubricant gel, anti-reflux clamp and easy entrance plastic guide wire
- Available in 12-14-16-18-20-22 and 24 FR sizes.

ENTERAL BESLENME TORBASİ (POMPA TİP-ÇİFTLİ)

Galena Yıkamalı Beslenme Torbası, Yıkamalı Beslenme Pompasına takılarak hastaların besin ve su ihtiyacını karşılamak için dizayn edilmiştir. Pompa ile uyumlu olarak kullanılabilen yıkamalı torba sayesinde beslenme torbasında bulunan borularda veya beslenme kateterinde bulunan besin ve ilaç atıkları da temizlenebilmektedir.

- Sadece bir hasta için kullanılabilir.
- Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir.
- Lateks içermez.
- DEHP içermez.
- Kullanım ömrü 24 saattir.

Dikkat: Her torba 24 saat sonrasında imha edilmeli veya çöpe atılmalıdır.



ENTERAL FEEDING BAG (PUMP TYPE-DOUBLE)

The Galena Washable Feeding Bag is designed to meet patients' nutritional and hydration needs when attached to a washable feeding pump. The washable bag, which is compatible with the pump, allows for the cleaning of food and medication residues in the tubes of the feeding bag or in the feeding catheter.

- For single-patient use only.
- Sterilized with ethylene oxide.
- Latex-free.
- DEHP-free.
- Usage life is 24 hours.

Caution: Each bag must be disposed of or thrown away after 24 hours.

ENTERAL BESLENME TORBASİ (POMPA TİP-TEKLİ)

Tekli Beslenme Pompasına takılarak hastaların besin ihtiyacını karşılamak için dizayn edilmiştir. Setin besleme borusundan bağlantısı kesilmeden kolayca ilaç ve su vermek için "Y" adaptörü mevcuttur.

- Sadece bir hasta için kullanılabilir.
- Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir.
- Lateks içermez.
- DEHP içermez.
- Kullanım ömrü 24 saattir.

Dikkat: Her torba 24 saat sonrasında imha edilmeli veya çöpe atılmalıdır.



ENTERAL FEEDING BAG (PUMP TYPE-SINGLE)

Designed to meet patients' nutritional needs when attached to a single feeding pump. A "Y" adapter is available to easily administer medication and water without disconnecting the set from the feeding tube.

- Can only be used for one patient.
- Sterilized with ethylene oxide.
- Latex-free.
- Does not contain DEHP.
- Usage life is 24 hours.

Caution: Each bag must be disposed of or thrown away after 24 hours.

ENTERAL BESLENME TORBASİ (GRAVITY)

Enteral beslenmeye ihtiyaç duyan hastaların mamalarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde almaları için üretilmiştir.

- Yerçekimi (gravity) modelidir.
- Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir.
- Yalnızca tek hasta kullanımı içindir.
- Tek kullanımlıktır.
- Lateks içermez.
- DEHP içermez.
- Kullanım ömrü 24 saattir.

Dikkat: Her torba 24 saat sonrasında imha edilmeli veya çöpe atılmalıdır.





ENTERAL FEEDING BAG (GRAVITY)

It is designed for patients who need enteral feeding to get their food healthy and safe.

- Gravity (gravity) model.
- Sterilized with Ethylene Oxide.
- For single patient use only.
- Single use.
- Latex-free.
- Does not contain DEHP.
- Usage life is 24 hours.

Caution: Each bag must be disposed of or thrown away after 24 hours.

PEG SETLERİ (FULL SET / STANDART SET)

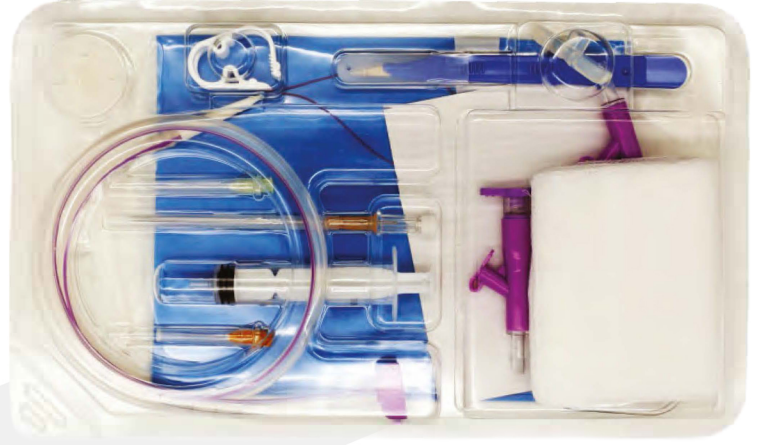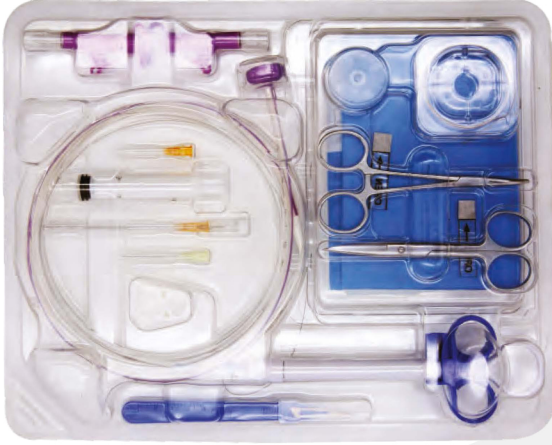

Perkütan Endoskopik Gastronomi (PEG), ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla, endoskopi yardımıyla karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesidir.

Ürün Açıklaması	Ölçü (FR)	İçerik
PEG Kit – Standart PEG Seti	12FR	1 Çekilebilir PULL PEG TUBE, 1 Beslenme Adaptörü, 1 Luer Locklu Beslenme Adaptörü
	14FR	1 Retention Halkası, 1 19G İğne 1 25G İğne
	16FR	1 Yerleştirme Teli (0.6mm*260cm), 1 10ml Şırınga, 1 Tek Kullanımlık No:11 Saplı Bisturi,
	18FR	1 Introducer İğnesi 1 Tubing Clamp 4 10*10 Gauze Spon, 1 Fenestre Örtü
PEG Kit – Full PEG Seti	20FR	1 5FR Retrieval Snare (1.8*260cm) (Full Set İçeriğinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Makas (Full Set İçeriğinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Hemostat (Full Set İçeriğinde Mevcuttur)
	22FR	4 10*10 Gauze Spon (Full Set İçeriğinde Mevcuttur) 1 Kullanım Kılavuzu
	24FR	5mg Kayganlaştırıcı Jel 5mg Povidone-Iodine

PEG SETS (FULL SET - STANDARD SET)

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) is the placement of a tube into the stomach through the abdominal wall with the aid of endoscopy to provide nutrition for patients who cannot be fed orally.

Product Description	Sizes (FR)	Content
PEG Kit – Standard PEG Set	12FR	1 Retractable PULL PEG TUBE 1 Feeding Adapter 1 Luer Lock Feeding Adapter
	14FR	1 Retention Ring 1 19G Needle 1 25G Needle
	16FR	1 Placement Wire (0.6mm*260cm) 1 10ml Syringe 1 Single-Use No. 11 Handle Scalpel
	18FR	1 Introducer Needle 1 Tubing Clamp 4 10*10 Gauze Pads 1 Fenestrated Drape
PEG Kit – Full PEG Set	20FR	1 5FR Retrieval Snare (1.8*260cm) (Included in Full Set) 1 Stainless Steel Scissors (Included in Full Set) 1 Stainless Steel Hemostat (Included in Full Set)
	22FR	4 10*10 Gauze Pads (Included in Full Set) 1 User Manual
	24FR	5mg Lubricating Gel 5mg Povidone-Iodine

MINİ BUTON GASTROSTOMİ KİTİ


Normal olarak ağız yoluyla (yutarak) yiyemeyen hastalara in vitro beslenme sağlamak veya mevcut beslenme ihtiyaçlarını yiyerek karşılayamayan hastalara ek in vitro beslenme sağlamak için kullanılır. Gastrostomi tüpü, sıvı gıda, mama veya ilacı taşımak için doğrudan karın duvarındaki stoma yoluyla hastanın midesine yerleştirilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güvenlik Tasarımı Balonu doldurulduğunda yatay olarak büyür ve stoma bölgesinde daha fazla yüzey alanı kaplar.
- Şafttan dış yastığın tabanına Konik Geçiş, daha güvenli bir oturma için tasarlanmıştır.
- Yerleşik Geri Dönüş Önleyici Valf maksimum koruma sağlar.
- Ayarlanabilir Balon, kişiselleştirilmiş uygun oturmaya sağlamak için dolgu varyasyonuna izin verir.

MINİ BUTTON GASTROSTOMİ KİTİ İÇERİĞİ

Mini Düğme Gastrostomi Tüpü, introdüser, sürekli besleme uzatma tüpü, bolus besleme uzatma tüpü, besleme şiringası, şiringa, gazlı bez ve kayganlaştırıcı jel.

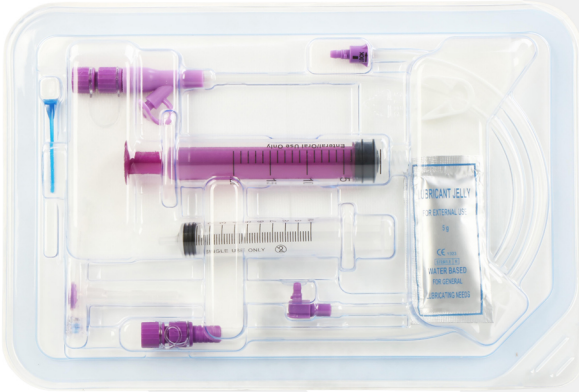

MINI BUTTON GASTROSTOMY KIT

It is used to provide in vitro nutrition to patients who cannot normally eat orally (by swallowing) or to provide supplemental in vitro nutrition to patients who cannot meet their existing nutritional needs by eating. The gastrostomy tube is placed directly into the patient's stomach through a stoma in the abdominal wall to deliver liquid food, formula, or medication.

PRODUCT FEATURES

- Safety Design The balloon expands horizontally when filled, covering more surface area in the stoma region.
- Conical Transition from Shaft to Outer Cushion Base is designed for a more secure fit.
- Built-in Backflow Prevention Valve provides maximum protection.
- Adjustable Balloon allows for filling variations to ensure a personalized, comfortable fit.

MINI BUTTON GASTROSTOMY KIT CONTENTS

Mini Button Gastrostomy Tube, introducer, continuous feeding extension tube, bolus feeding extension tube, feeding syringe, syringe, gauze, and lubricating gel.

PEG Y KONNEKTÖR PEG Y CONNECTOR



BESLENME ŞİRINGASI

Tek kullanımlık steril şiringa, manuel şiringa enjeksiyonunun yapılmasından hemen sonra sıvının pompalanması için kullanılır. Şiringa EO ile sterilize edilmiştir, ayrıca toksik olmayan, pirojen içermeyen, hemolitik olmayan bir reaksiyondur. 50 ml Enjektör olarak mevcuttur.



FEEDING SYRINGE

Sterile syringe for single use is used for the pumping of liquid immediately after the introduction of the manual syringe injection. The syringe is sterilized by EO, it is also non-toxic, pyrogen-free, non-hemolytic reaction. Available as 50ml Injector.

YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPASI



- Galena BN-702 Beslenme Pompası, ağız yolu ile beslenme yetisini kaybetmiş hastaların besinlerini hastalara aktarmasını sağlayan elektronik bir tıbbi cihazdır.
- Galena BN-702 Beslenme Pompası, beslenme programları arasında hastaya su verebilmektedir. Bu özelliği sayesinde hastaların sıvı ihtiyaçlarını giderirken, aynı zamanda beslenme torbasının borularında bulunan besin ve ilaç atıklarını temizleyebilmektedir.
- Beslenme Torbalarının borularında oluşan hava kabarcıklarını tahliye edebilme özelliği sayesinde, beslenme sırasında hastaların midesine hava kaçma olasılığını düşürerek hastalarda gaz sancısı oluşumunu en aza indirmektedir.
- Batarya ile çalışabilen Galena BN-702 Beslenme Pompası, elektrik kesintilerine karşı 6~10 saat arasında güç kablosu olmadan mobil olarak kullanılabilir.
- Küçük dizaynı sayesinde yer tutmaz.
- Serum askısına takılabilmesi için aparatı mevcuttur.
- Sessiz çalışma özelliği sayesinde hastaya ve hasta yakınlarına rahatsızlık vermeden çalışabilir.
- 3 mod özelliği sayesinde, beslenme modu (kolay mod), beslenme+yıkamalı mod (çoklu mod) ve aralıklı mod ile hastaya 24 saat besin verebilme özelliğine sahiptir.
- Galena BN-702 Beslenme Pompası, üzerinde bulunan ultrasonik sensör yardımı ile beslenme torbalarının borularında meydana gelebilecek tıkanıklıkları tespit ederek uyarı vermektedir. Bu özelliği sayesinde hastalar beslenme programlarını aksatmadan sürdürebilmektedir.
- Ev ve Hastane kullanımı için uygundur.
- Galena Yıkamalı Beslenme Torbası ile çalışır

WASHABLE ENTERAL FEEDING PUMP

- The Galena BN-702 Feeding Pump is an electronic medical device that delivers nutrients to patients who have lost the ability to feed themselves orally.
- The Galena BN-702 Feeding Pump can provide water to the patient between feeding programs. This feature allows it to meet the patient's fluid needs while also cleaning food and medication residues from the feeding bag's tubes.
- Its ability to release air bubbles formed in the tubes of feeding bags reduces the possibility of air entering the patient's stomach during feeding, minimizing the occurrence of gas pain in patients.
- The Galena BN-702 Feeding Pump, which can be battery-operated, can be used mobile without a power cord for 6 to 10 hours in case of power outages.
- Its compact design saves space.
- It comes with an attachment for hanging on an IV pole.
- Its quiet operation ensures it does not disturb the patient or their relatives.
- With its 3-mode feature, it can provide 24-hour nutrition to the patient with feeding mode (easy mode), feeding+flushing mode (multi-mode), and intermittent mode.
- The Galena BN-702 Feeding Pump detects blockages in feeding bag tubes using its built-in ultrasonic sensor and issues an alert. This feature allows patients to continue their feeding programs without interruption.
- Suitable for home and hospital use.
- Works with the Galena Washable Feeding Bag.



TEKLİ ENTERAL BESLENME POMPASI



- Galena BN-700A Beslenme Pompası, ağız yolu ile beslenme yetisini kaybetmiş hastaların besinlerini hastalara aktarmasını sağlayan elektronik bir tıbbi cihazdır.
- Beslenme Torbalarının borularında oluşan hava kabarcıklarını tahliye edebilme özelliği sayesinde, beslenme sırasında hastaların midesine hava kaçma olasılığını düşürerek hastalarda gaz sancısı oluşumunu en aza indirmektedir.
- Batarya ile çalışabilen Galena BN-700A Beslenme Pompası, elektrik kesintilerine karşı 6~10 saat arasında güç kablosu olmadan mobil olarak kullanılabilir.
- Küçük dizaynı sayesinde yer tutmaz.
- Sessiz çalışma özelliği sayesinde hastaya ve hasta yakınlarına rahatsızlık vermeden çalışabilir.
- Sürekli Besleme ve Aralıklı Besleme Modları ile hastaya 24 saat besin verebilme özelliğine sahiptir.
- Galena BN-700A Beslenme Pompası, üzerinde bulunan ultrasonik sensör yardımıyla beslenme torbalarının borularında meydana gelebilecek tıkanıklıkları tespit ederek uyarı vermektedir. Bu özelliği sayesinde hastalar beslenme programlarını aksatmadan sürdürebilmektedir.
- Ev ve Hastane kullanımı için uygundur.
- Galena Tekli Beslenme Torbası ile çalışır.

SINGLE ENTERAL FEEDING PUMP

- The Galena BN-700A Feeding Pump is an electronic medical device that delivers nutrients to patients who have lost the ability to feed themselves orally.
- Its ability to remove air bubbles from feeding tube lines reduces the likelihood of air entering the patient's stomach during feeding, minimizing the occurrence of gas pain.
- The Galena BN-700A Feeding Pump, which can be battery-operated, can be used on the go for 6 to 10 hours without a power cord in case of power outages.
- Its compact design means it takes up little space.
- Its quiet operation allows it to work without disturbing the patient or their relatives.
- It has the ability to provide 24-hour nutrition to the patient with Continuous Feeding and Intermittent Feeding Modes.
- The Galena BN-700A Feeding Pump detects blockages that may occur in the tubes of feeding bags with the help of the ultrasonic sensor on it and gives a warning. Thanks to this feature, patients can continue their feeding programs without interruption.
- Suitable for both home and hospital use.
- Compatible with the Galena Single Feeding Bag.





CİHAZLAR

GALENA HASTANE TİPİ CERRAHİ ASPIRATÖR 7A-23D

Hastanede kullanıma uygun çift şişelikli cerrahi aspiratör.

Teknik Veriler:

Voltaj: AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz
Maksimum negatif basınç: $\geq$ 0.08 Mpa
Çalışma ses seviyesi: $\leq$ 65dB (A)
Giriş gücü: 180VA
Pompalama sıklığı: $\geq$ 20L/dk
Rezervuar kapasitesi: 2500ml/adet * 2 adet

GALENA SURGICAL HOSPITAL TYPE SUCTION DEVICE 7A-23D

Surgical aspirator with double bottle suitable for use in the hospital

Technical Data:

Power Voltage: AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz
Max negative pressure: $\geq$ 0.08 Mpa
Operation noise: $\leq$ 65dB (A)
Input power: 180VA
Pumping frequency: $\geq$ 20L/dk
Reservoir capacity: 2500ml/adet * 2 adet



GALENA EV TİPİ ASPIRATÖR 7E-A

Yüksek emiş gücü, geniş akış, düşük ses.. Yeni tasarımı ile aspirasyon şişesi cihazın içine gizlenmiştir ve kare basınç ölçer ekranına sahip cihaz tamamen plastikten yapılmıştır. Bu tasarım sayesinde şık ve kusursuz görünüm ile daha gürültüsüz aspirasyon yapılabilir.

Akıllı tasarımı sayesinde irin ve mukusun cihazın içine girmesini engeller. Kompakt, hafif ve acil durumlarda taşınması kolaydır.

Teknik Veriler:

Voltaj: AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz
Maksimum negatif basınç: $\geq$ 0.075 Mpa
Çalışma ses seviyesi: $\leq$ 65dB (A)
Giriş gücü: 90VA
Pompalama sıklığı: $\geq$ 15L/dk
Rezervuar kapasitesi: 1000ml/adet * 1 adet



GALENA PORTABLE SUCTION UNIT 7E-A

High negative pressure, large flux, low noise. It is a brand new mechanism design with suction bottle hidden inside and square negative pressure meter crust completely made of plastic. This design not only reduces the working noise but also makes it more fashionable and precise.

It adopts advanced overflow-protection design, which can prevent pus and mucus from leaking into the machine. Compact, lightweight, and easy to carry especially suitable for emergency and outside use.

Technical Data:

Power Voltage : AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz
Max negative pressure: $\geq$ 0.075 Mpa
Operation noise: $\leq$ 65dB (A)
Input Power: 90VA
Pumping frequency: $\geq$ 15L/dk
Reservoir capacity: 1000ml/adet * 1 adet

GALENA EV TİPİ ŞARJLI ASPIRATÖR 7E-D

Yağ içermeyen yağlama pompası, kare negatif basınç kadranı ve yerleşik şişe. Yüksek emiş gücü, geniş akış, düşük ses... Bu tasarım sayesinde şık ve kusursuz görünüm ile daha gürültüsüz aspirasyon yapılabilir. Akıllı tasarımı sayesinde irin ve mukusun cihazın içine girmesini engeller. Kompakt, hafif ve acil durumlarda taşınması kolaydır.

Teknik Veriler:

Voltaj: AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz; 12VDC
Maksimum negatif basınç: $\geq$ 0.075 Mpa
Çalışma ses seviyesi: $\leq$ 65dB (A)
Giriş gücü: 44VA
Pompalama sıklığı: $\geq$ 15L/dk
Rezervuar kapasitesi: 1000ml/adet * 1 adet



GALENA PORTABLE SUCTION UNIT 7E-D (CHARGED)

Adopting oil free lubrication pump, square negative pressure dial and built-in bottle. Low noise, small size, easy to carry. This design not only reduces the working noise but also makes it more fashionable and precise.

It adopts advanced overflow-protection design, which can prevent pus and mucus from leaking into the machine. Compact, lightweight, and easy to carry especially suitable for emergency and outside use.

Technical Data:

Power Voltage :
AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1 Hz; 12VDC
Max negative pressure: $\geq$ 0.075 Mpa
Operation noise: $\leq$ 65dB (A)
Input Power: 44VA
Pumping frequency: $\geq$ 15L/dk
Reservoir capacity: 1000ml/adet * 1 adet

7E-G1 TAŞINABİLİR ASPIRATÖR CİHAZI (BATARYALI)

Taşınabilir Aspiratör Cihazı negatif basınç sağlamak amacıyla tasarlanmış olup cerrahi işlemler sırasında cerrahi alandaki sıvıları ve kalıntıları gidermek için aspirasyon tüpleri ve aspirasyon kataterleri ile birlikte kullanılır. Pürülan ve viskoz sıvıların aspire edilmesi gereken hastalar için uygundur.



Ana teknik performanslar

- Kategori: Yüksek vakum / Yüksek akış
- Güç Kaynağı: AC (100-240)V, 50Hz/60Hz veya DC 12V 5A DC güç kaynağı DC güç kaynağı ve Şebeke devresi, 2MOOP gereksinimlerini karşılar.
- Giriş Gücü: 150VA
- *Maksimum vakum: (85 $\pm$ 5)kPa
- Vakum düzenleme aralığı: 20kPa ~ Maksimum vakum
- *Serbest hava akışı: (27 $\pm$ 4)l/dak **
- Toplama kabı: 1000ml/adet, 1 adet
- Gürültü: $\leq$ 65dB(A)
- Ağırlık: Yaklaşık 4kg
- Boyutlar (yaklaşık): 480 mm (U) x 189 mm (G) x 285 mm (Y)
- Servis ömrü: 5 yıl (kırılgan ve sarf malzemeleri hariç)

7E-G1 PORTABLE ASPIRATOR DEVICA (WITH BATTERY)

Portable Suction Unit is intended for negative pressure supply and is used in combination with suction tubing and suction catheters to remove fluids and debris from the surgical field during surgical procedures. It is suitable for patients who need to aspirate purulent and viscous fluids.

Main technical performances

- Category: High vacuum / high flow
- Power Supply: AC(100~240)V ,50Hz/60Hz or DC 12V 5A
DC power supply The DC power supply and Mains circuit meets the requirements of the 2MOOP
- Input power: 150VA
- *Maximum vacuum: (85 $\pm$ 5)kPa
- Vacuum regulating range: 20kPa~Maximum vacuum
- *Free air flow: (27 $\pm$ 4)l/min **

- Collection container: 1000ml/pc,1pc
- Noise: $\leq$ 65dB(A)
- Weight: Approx 4kg
- Dimension(approx): 480 mm(L) $\times$ 189 mm(W) $\times$ 285 mm(H)
- Service life: 5 years (except for fragile and consumable parts)


CPAP20 - APAP20

CPAP cihazı, uyku apnesi için rahat ve kolay bir solunum terapisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dinlendirici ve güvenli bir gece uykusu sağlar. Hava kaçağı telafisi ve basıncı kademeli olarak etkili bir şekilde artıran "Rampa" özelliğinin birleşimi, solunum çabasını azaltır ve kullanıcı uyumunu büyük ölçüde artırır. Hasta güvenliğini sağlamak için, solunum duraklamaları algılandığında basınç otomatik olarak ayarlanır. Cihaz, kolay anlaşılan bir arayüz ve sessiz çalışma ile montajı kolaydır ve ev kullanımı için olağanüstü performans sunar. Ayrıca, kompakt tasarımı ve entegre nemlendiricisi, herhangi bir seyahat kısıtlaması olmadan rahat taşınabilirlik sağlar.



CPAP20 - APAP20

The Respircare's CPAP machine is designed to provide a comfortable and easy respiratory therapy for sleep apnea, ensuring a restful and safe night's sleep. The combination of leak compensation and "Ramp" feature that gradually increase pressure effectively reduces respiratory effort and greatly enhances the user compliance. To ensure patient safety, the pressure will be automatically adjusted upon detecting respiratory pauses. The device is easy to assemble, with an intuitive interface and quiet operation, delivering outstanding performance for home use. Additionally, its compact design and integrated humidifier allow for convenient portability without any travel limitations.

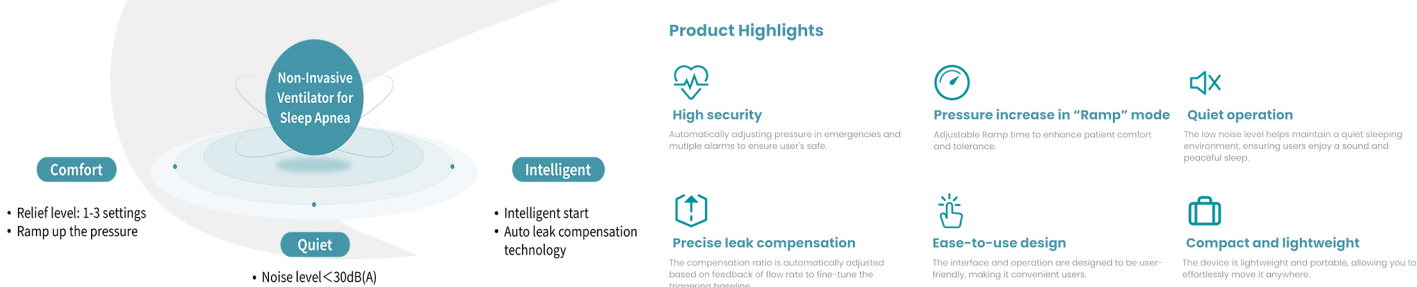

Specification

Mode	CPAP / CPAP, APAP / CPAP, APAP, AutoS, S
CPAP (kPa)	0.4-2.0
IPAP (kPa)	NA / 0.4-2.0 / 0.4-2.5
EPAP (kPa)	NA / 0.4-1.8 / 0.4-2.0

BPAP25 PLUS / BPAP30 PLUS

Serbest nefesi başlatmak için tek bir düğme BPAP non-invaziv ventilatör, KOAH, astım veya diğer kronik solunum yolu hastalıkları olan hastalar için evde yaygın olarak kullanılır. Sığ ve derin hızlı nefes alma, öksürük ve tüp titreşimi gibi anormal solunum kalıplarını algılayan ve düzenleyen gelişmiş algoritmalarla donatılmış ve sızıntı telafisi ile birlikte hastaların tutarlı basınçlı hava akışına kolayca uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu cihaz sessizce çalışır ve hastaların gönül rahatlığı için sakin bir ortam yaratır. Kullanıcı dostudur ve öğrenmesi kolaydır, serbest nefesi başlatmak için sadece bir düğme vardır.



Öne Çıkan Özellikler



Mükemmel senkronizasyon algoritmaları

Solunum konforunu sağlamak için inspirasyon tetikleme teknolojisi ve ekspirasyon basınç tahliye teknolojisi.



Hassas kaçak telafisi

Telaflı oranı, tetikleme taban çizgisini hassas bir şekilde ayarlamak için akış hızının geri bildirimine göre otomatik olarak ayarlanır.



Çoklu terapi seçenekleri

Geniş uygulama yelpazesi için 4 mod.



Minimum gürültü seviyesi

Sessiz çalışma, huzurlu ve konforlu bir terapi ortamı sağlar.



Kullanımı kolay tasarım

Sezgisel arayüz ve kullanıcı dostu tasarımı, ilk kez kullananlar veya yaşlılar için kullanımı kolaylaştırır.



Kompakt ve hafif

Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde daha az yer kaplar ve kullanıcılar tarafından taşınması daha kolaydır.



Özellikler

Mod	CPAP, S, T, S/T
CPAP (kPa)	0.4-2.0
IPAP (kPa)	0.4-2.0 / 0.4-2.5 / 0.4-3.0
EPAP (kPa)	0.4-1.8 / 0.4-2.0



BPAP25 PLUS / BPAP30 PLUS

One button to start a free breath The BPAP non-invasive ventilator is widely used at home for patients with COPD asthma, or other chronic respiratory diseases. Equipped with advanced algorithms that detect and regulate abnormal breathing patterns such as shallow and deep rapid breathing, coughing, and tube vibration, along with leak compensation, it helps patients easily adapt to consistent pressurized airflow. This device operates quietly, creating a tranquil environment for patients' peace of mind. It is user-friendly and easy to learn, with just one button to start a free breath.



Product Highlights



Superb synchronization algorithms

Inspiratory trigger technology and expiratory pressure relief technology to ensure the breathing comfort.



Precise leak compensation

The compensation ratio is automatically adjusted based on feedback of flow rate to fine-tune the triggering baseline.



Multiple therapy options

The low noise level helps maintain a quiet sleeping environment, ensuring users enjoy a sound and peaceful sleep.



Minimal noise level

Quiet operation provides a peaceful and comfortable therapy environment.



Ease-to-use design

Intuitive interface and user-friendly design make it easy to use for first-time users or elders.



Compact and lightweight

The compact and lightweight design makes it take up less space and easier for users to carry.

Specification

Mode	CPAP, S, T, S/T
CPAP (kPa)	0.4-2.0
IPAP (kPa)	0.4-2.0 / 0.4-2.5 / 0.4-3.0
EPAP (kPa)	0.4-1.8 / 0.4-2.0

GALENA "JAY" SERİSİ OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ

Solunum hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, yüksek irtifa hastalığı, uyku hipoksemisi, hamile kadınlar, zihinsel işçi, öğrenci, aşırı şişman kişiler, uykusuzluk, yaşlı insanlar ve rinit gibi diğer hastalık nedeniyle akut veya kronik oksijen eksikliği durumunda kullanılır.

- Geniş LCD Ekranda; çalışma basıncının çalışma saatinin, oksijen seviyesinin ve çalışma sıcaklığının gösterimi
- Yüksek basınç alarmı
- Düşük basınç alarmı
- Isı alarmı
- Güç kesintisi alarmı
- Düşük oksijen seviyesi alarmı
- Yüksek oksijen seviyesi alarmı
- 40 saate kadar zaman ayarı (10'ar dakika ara ile)
- JAY5 model için 5L/Dk, JAY10 model için 10L/Dk. yüksek oksijen akışı
- Tekerlekli, kolay taşınabilir
- Kolay doldurulabilen nemlendirici



Teknik Parametreler	JAY 5	JAY 10
Oksijen Akışı (Lt/dakika)	0.5-5Lt/dk.	0.5-10Lt/dk.
Oksijen saflığı	%93 (± 3)	%93 (± 3)
Çıkış Basıncı (KPa)	40-70	40-70
Ses Seviyesi (Db)	≤50	≤50
Ağırlık(kg)	26	26

Respiratory diseases, cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, high altitude sickness, sleep hypoxia, pregnant women, mental workers, students, extremely obese individuals, insomnia, elderly people, and other conditions such as rhinitis that cause acute or chronic oxygen deficiency.

- Large LCD display shows working pressure, working hour, oxygen level and working temperature
- High pressure alarm
- Low pressure alarm
- Working temperature alarm
- Low oxygen level alarm
- Yüksek oksijen seviyesi alarmı
- High oxygen level alarm
- Timer, 10 minutes gap till 40 hours
- 5L/Min oxygen flow for Jay 5 and 10L/Min oxygen flow for Jay 10 models
- Easily removable by the help of wheels
- Heater humidifier can be easily filled

Technical Parameters	JAY 5	JAY 10
Flow Rate (Lt/Min)	0.5-5Lt/min	0.5-10Lt/min
Oxygen Purity	%93 (± 3)	%93 (± 3)
Outlet Pressure (KPa)	40-70	40-70
Sound Level (Db)	≤50	≤50
Weight(kg)	26	26

JLO-1090Si 10L Oksijen Konsantratörü

Tıbbi oksijen konsantratörü, moleküler elek fiziksel adsorpsiyon ve desorpsiyon tekniği kullanılarak havadan oksijen toplamak için basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) teknolojisi temeline dayanan yeni bir ekipmandır. Moleküler elek oksijen konsantratörü ile doldurulmuştur, hava basınç eklendiğinde azot adsorpsiyonu olabilir, daha sonra geri kalan oksijen toplanır ve filtrelendikten sonra yüksek saflıkta oksijen haline gelir.

Özellikler

- Güç: 120V, 60Hz veya 220V 50Hz
- Tüketim: 260W±%10
- Oksijen Çıkış Akışı: 1-10L/DK
- Oksijen Konsantrasyonu: ≥%93±%33L/DK
- Çıkış Basıncı: 5±0,5PSI
- Gürültü Seviyesi: ≤42dB
- Ağırlık: 12kg
- Ürün Boyutu: 400*300*510mm



JLO-1090Si 10L oxygen concentrator

Medical oxygen concentrator is a new equipment with a foundation of pressure swing adsorption (PSA) technology to collect oxygen from the air, which was used molecular sieve physical adsorption and desorption technique in filled with molecular sieve oxygen concentrator, the air can be nitrogen adsorption when the pressure is added, then the rest of the oxygen is collected which becomes a high purity of oxygen after the processing of filtered.

Specifications

- Power: 120V, 60Hz or 220V 50Hz
- Consumption: 260W±10%
- Oxygen Outlet Flow: 1-10L/MIN
- Oxygen Concentration: ≥93%±3%3L/min
- Outlet Pressure: 5±0.5PSI
- Noise Level: ≤42dB
- Weight: 12kg
- Product Size: 400*300*510mm

PO3/PO5 TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

PO3/PO5 gelişmiş moleküler elek teknolojisi ile zenginleştirilmiş oksijenli havayı verimli bir şekilde sağlayan kompakt ancak güçlü bir taşınabilir oksijen konsantratörüdür. Yüksek hassasiyete sahip nefes senkronize tetikleme teknolojisini kullanır, oksijen kullanımını en üst düzeye çıkarır ve hastalara daha fazla konfor sağlar. PO3/PO5 sırasıyla üç ve beş ayarı vardır. 93±3% oksijenin sabit çıkışını korurken solunum ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilir. Hafif ve kompakt tasarımı, seyahat için idealdir.



Ürün Özellikleri



Akıllı Teknoloji

Nefesle senkronize tetikleme teknolojisi, nefes algılanmadığında hasta güvenliği için yedek nabız ve sürekli modlarla tutarlı bir yüksek oksijen akışı sağlar.



Yüksek Çıkış Akışı

PO3: Maksimum oksijen akışı 660 mL/dakikadır ve çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak için 3 artı doz ayarı sunar.

PO5: Maksimum oksijen akışı 1000 mL/dakikadır ve çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak için 5 artı doz ayarı sunar.



Sessiz Çalışma

60 dBA'dan düşük gürültü seviyesiyle hastalar ve çevresindekiler için huzurlu bir ortam sunar.



Tıbbi Sınıf Oksijen

Üst düzey ve değiştirilebilir moleküler elek, %93±3 konsantrasyonda oksijen sağlar.



Hafif ve Kompakt

Ağırlığı sadece 2 kg'dır, bu da varlığını hissetmeden her yere kolayca taşınmasını sağlar.



PO3/PO5 Portable Medical Oxygen Concentrator

PO3/PO5 is a compact yet powerful portable oxygen generator that efficiently provides enriched oxygen air through advanced molecular sieve technology. The machine adopts breath-synchronized triggering technology, which has high sensitivity, maximizing oxygen utilization and providing enhanced comfort for patients. PO3/PO5 respectively have three and five settings. They can effectively meet respiratory needs while maintaining a stable output of $93\pm3\%$ oxygen. Its lightweight and compact design makes it ideal for travel.



Product Highlights



Smart technology

The breath-synchronized triggering technology ensures a consistent high oxygen flow, with backup pulse and continuous modes for patient safety in case of no breath detection.



High output flow

PO3: The maximum oxygen flow is 660mL/min and it provides 3 pulse-dose settings to cater to a wide range of needs.

PO5: The maximum oxygen flow is 1000mL/min and it provides 5 pulse-dose settings to cater to a wide range of needs.



Quiet operation

It offers a peaceful atmosphere for patients and those nearby, with noise levels lower than 60 dBA.



Medical-grade oxygen

The high-end and replaceable molecular sieve provides oxygen with a concentration of $93\pm3\%$.



Lightweight & compact

The weight is just 2 kgs, making it easy to carry anywhere without even feeling its presence.

GALENA TURN HF808 POZİSYON VEREBİLEN HAVALI YATAK

Hareketsiz yatmaktan ve oturmaktan dolayı oluşan basınç yaraları 2 ila 6 saat içerisinde ortaya çıkabilir. Yara oluşumunu önleyecek ve oluşmuş yaraların tedavisini sağlayacak başlıca yöntem, yara oluşumuna sebep olan basıncın ortadan kaldırılmasıdır. Vücudun ağırlığından dolayı, yüzey ile temas eden bölgelerdeki basıncın sürekli olarak dağıtılmasını sağlayan havalı yataklar, bu konudaki ilk ve en uygun çözümdür..

Ürün Özellikleri

- Sessiz çalışır. Rahat bir uyku için 20 desibelden daha az ses düzeyi.
- Bası yaralarının tedavisi ve iyileşmesi için çok yönlü yara bakım çözümleri sunar.
- Ülser önleme için AB alternatif modu
- Kaynak dikişli, su geçirmez ve buhar geçirimli fermuarlı streç PU kılıf
- Hızlı söndürme için kolay açılır CPR
- Çıkarılabilir ve takılabilir delik tasarımı, otomatik LCD dokunmatik ekran, sessiz hava motoru
- İsteğe bağlı 12/18/24 dakika çalışma süresi
- Hasta güvenliği için görsel ve sesli alarmlar
- Statik fonksiyonlu ve otomatik geri dönüşlü harici, değiştirilmesi kolay yatak hücreleri.
- Baş kaldırma, ayak kaldırma, sola döndürme ve sağa döndürme fonksiyonları ile hastanın ağırlığına göre otomatik olarak ayarlanır
- Nefes alabilen malzemelerden üretilmiştir, yangın geciktiricidir, SGS onaylıdır
- Tayvan Nanya naylon PVC / TPU malzeme, nefes alabilir, yıkanabilir ve su geçirmez
- Ayrı hava yastığı, hasar ve hava kaçağı durumunda sökülmesi ve değiştirilmesi kolaydır
- Yüzeyde hava sirkülasyonunu sağlamak ve cildi kuru tutmak için hava püskürtebilen mikro hava delikleri vardır
- Sırt kaldırma açısı yaklaşık 0-45°, dönüş yüksekliği yaklaşık 25 cm'dir. Sadece bir tuşla ters çevirme, geri çevirme, dalga masajı uygulanabilir.



GALENA TURN HF808 Air Mattress with Positioning Capability

Pressure sores caused by lying and sitting still can develop within 2 to 6 hours. The main method to prevent the formation of wounds and to treat wounds that have already formed is to eliminate the pressure that causes wound formation. Due to the weight of the body, air mattresses are the first and most appropriate solution in this regard, which ensure that the pressure in the areas in contact with the surface is constantly distributed.

Product Features

- It works quietly. Less than 20 decibels sound level for a comfortable sleep.
- Versatile wound care solutions for the treatment and healing of pressure sores
- EU alternative mode for ulcer prevention
- Stretch PU cover with welded seam, waterproof and vapor permeable zipper
- Easy-to-open CPR for rapid extinguishing
- Removable and pluggable hole design, automatic LCD touch screen, silent air motor
- 12/18/24 minutes working time optional
- Visual and audible alarms for patient safety
- External, easy-to-replace bed cells with static function and automatic return.
- Automatically adjusts to the patient's weight with head lift, foot lift, left rotation and right rotation functions
- Made of breathable materials, fire retardant, SGS approved
- Taiwan Nanya nylon PVC/TPU material, breathable, washable and waterproof
- Separate airbag, easy to remove and replace in case of damage and air leakage
- The surface has micro air vents that can spray air to keep air circulating and keep the skin dry
- Back lift angle is about 0-45°, rotation height is about 25 cm. Inversion, reversal, wave massage can be performed with just one button.

GALENA XT-30 HAVALI YATAK SİSTEMİ



- I. ve II. derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır.
- Kabarcık tipi (Baklava dilimli) PVC yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır.
- Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir.
- Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir.
- 100 kg'a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir.

GALENA XT-30 AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM

- Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention
- It consists of bubble type PVC mattress
- Powerful, adjustable pump unit
- Can be operated 24 hours a day without disruption
- Provides full support to patients up to 100 kg

GALENA XT-40 HAVALI YATAK SİSTEMİ



- I. ve II. derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır.
- Kabarcık tipi (Baklava dilimli) PVC yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır.
- Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir.
- Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir.
- 100 kg'a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir.

GALENA XT-40 AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM

- Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention
- It consists of bubble type PVC mattress
- Powerful, adjustable pump unit
- Can be operated 24 hours a day without disruption
- Provides full support to patients up to 100 kg

GALENA XT-50 HAVALI YATAK SİSTEMİ




- I. ve II. derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır.
- Boru tipi yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır.
- Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir.
- 4*22 Hücre sayısına sahiptir.
- Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir.
- 130 kg'a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir.

GALENA XT-50 AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM

- Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention
- It consists of tubular type PVC mattress
- Powerful, adjustable pump unit
- 4*22 Cell System
- Can be operated 24 hours a day without disruption
- Provides full support to patients up to 130 kg

GALENA ABC SİSTEMLİ ALTERNATİF BASINÇLI HAVALI YATAK GS 200

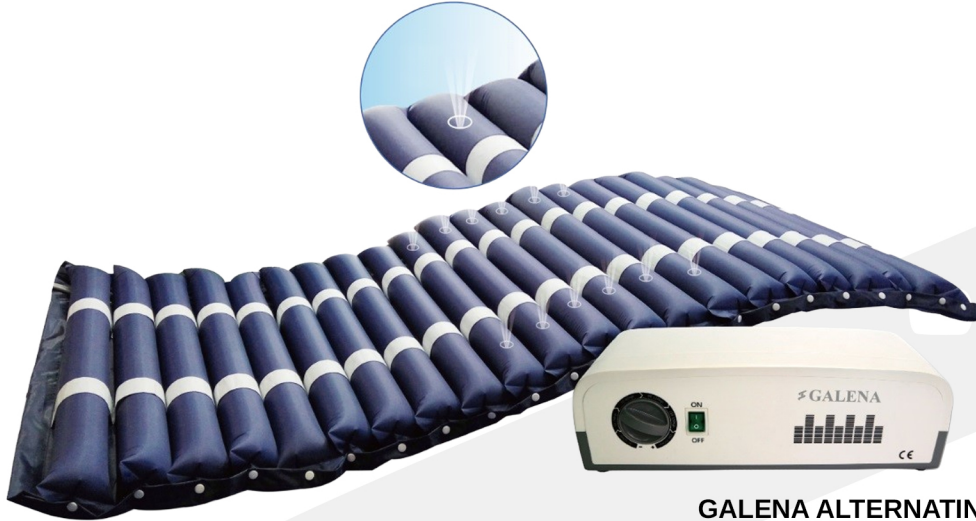

GALENA ALTERNATING PRESSURE MATTRESS WITH ABC SYSTEM GS 200

ABC alternatifi, her alternatif döngü sırasında diğer 3 hava hücresini değiştiren bir sistemdir. Her dönüşüm döngüsünde yatağın %33'ü söndürülür ve %66'sı şişirilir, bu vücudun %66 oranında daha fazla desteğe sahip olduğu anlamına gelir.

- Terapatik yatak, bireysel bakıma olanak sağlayan ayarlanabilir bir pompa içerir, ülser basınç terapisini destekler, konfor ayarına sahiptir.
- Basitlik, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı
- Sessiz pompa, düşük ses, düşük titreşim, düşük sıcaklık
- Ayar düğmesi ile kolay basınç ayarı
- Pompada bulunan dahili askısı ile karyolaya kolayca sabitlenebilir
- Alternatif şişirme, üstün terapatik tedavi sağlar
- Dayanıklı, ağır, düşük toksikli premium vinilden üretilmiştir.
- - Ventilasyon tedavisi, I - IV evre basınç ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi için en iyi terapatik ortamın yaratılmasına yardımcı olur. Ventilasyonlu yatak, hasta cildindeki aşırı nemi ve teri azaltarak cilt deformasyonunu en aza indirger, yara tedavisinin en uygun şekilde yapılmasına olanak sağlar.

ABC alternating is a type of alternating that alternates every other 3 air cell during each alternating cycle. In each alternating cycle, 33% of the mattress is deflated and 66% is inflated, this mean the body has more support by 66%.

- Therapeutic mattress supports good ulcer pressure therapy which includes and adjustable pump that allows for individual care, got comfort setting.
- Simplicity, reliability and ease of use
- Quiet pump, low noise, low vibration, and low temperature
- With knob easy adjust pressure
- Fixed hook easy fix on bed frame
- Alternating inflating provides superior therapeutic treatment
- Made of durable heavy, low toxic Premium vinyl
- Ventilation therapy helps to create the best therapeutic environment for the prevention and treatment of stage I - IV pressure ulcers. The ventilated bed minimizes skin deformation by reducing excessive moisture and sweat on the patient's skin, allowing optimal wound therapy.

Kompresör Özellikleri

- Güç Kaynağı: 220V/50Hz
- Hava çıkışı: 5-7lt/dk
- Basınç aralığı: 50mmHg – 120mmHg
- Döngü süresi: 12dk
- Güç tüketimi: 7 W; Sigorta: 1A
- Ebat: 27.5 (L) x 13.5 (W) x 9 (H) cm
- Ağırlık: 1.4 kg

Compressor Specifications

- Power Supply: 220V/50Hz
- Air output: 5-7lt/min
- Pressure range: 50mmHg – 120mmHg
- Cycle time: 12dk
- Power consumption: 7 W; Fuse: 1A
- Size: 27.5 (L) x 13.5 (W) x 9 (H) cm
- Weight: 1.4 kg

Şilte Özellikleri

- Hava hücreleri: Naylon/PVC
- Altı: Tarpaulin / Muşamba
- Yatak ağırlığı: 3.5-4 kg
- Ağırlık kapasitesi: 120-130 kg
- Standart Ebat: 185(L) x 80(W) x 7.5(H) cm

Mattress Specifications

- Standard Size: 185(L) x 80(W) x 7.5(H) cm
- Air cells: Nylon/PVC
- Bottom: Tarpaulin
- Mattress weight: 3.5-4 kg
- Weight capacity: 120-130 kg


GALENA BARIATRİK HAVALI YATAK

Bariatrik yatak, hasta rahatlığını ön plana çıkartırken, basınç noktalarını dağıtarak, yaraların oluşmasını önler. 450 kg'a kadar hastayı destekler ve üzerindeki antibakteriyel kılıf hijyen sağlarken, ısıya dayanıklılığı sayesinde güvenlik sunar.

450 kg'a kadar ağır hastalar için çift pompa desteği Otomatik ağırlık konfor modu



Dokunmatik Panel

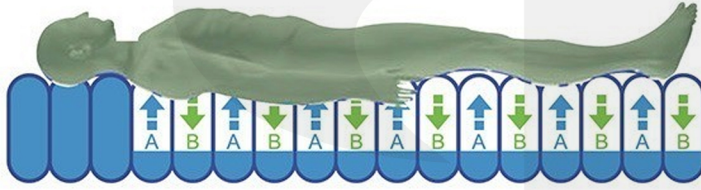

Acil durumlarda hızlı hava tahliyesi için CPR



Fermuarlı 4 yönlü esneyen PU kılıf

- 9" Yüksekliğinde 21 Hava Hücresi
- Boyutlar: 200 cm (U) x 90-138 cm (G) x 23,5 cm (Y)
- Güvenlik Korumalı Sünger Taban
- PU Üst Kılıf
- Konforlu Dikdörtgen Hava Hücreleri (Opsiyonel)
- 4 Yönlü Fermuar
- Antibakteriyel çarşaf
- %50 yerine %67'ye kadar AB Alternatif Basınç Azaltma (Opsiyonel)
- Ventilasyonlu
- 10-15-20-25 dk dalgalanma süresi ayarı
- Oturma pozisyonu modu
- Statik mod
- Transport modülü
- Hasta transferi için tutma kolları
- Karyolayla bağlantı kemerleri
- İsteğe bağlı boru iptali için valfli sistem
- En Üstte 1-3 Hava Hücresi Yastık Özelliği
- Acil Durumlarda Hızlı Tahliye için CPR
- Ağırlık Kapasitesi: 280-450 kg

- ABC Çift Hava Pompası ile Alternatif Çalışma
- Elektrik Kesintisi ve Düşük Basınç Algılama / Sesli Alarm
- Kilitleme/Sessize Alma İşlevi
- Otomatik Ağırlık Kontrolü
- Statik Hemşirelik Modu, 30 dakika sonra Alternatif Çalışmaya Dönüş
- Oturma Pozisyonu Daha Fazla Destek Sağlar
- CPC Hızlı Bağlantı Elemanı ve Çıkarılabilir 4M Kablo
- Boyutlar: 34,5 cm (U) x 19 cm (G) x 14,5 cm (Y)


GALENA BARIATRIK AIR MATTRESS

The bariatric bed prioritizes patient comfort while preventing pressure sores by distributing pressure points. It supports patients weighing up to 450 kg, and its antibacterial cover ensures hygiene while providing safety thanks to its heat resistance.

Dual Pump for Heavy patient support up to 450kgs Auto weight comfort mode



Touch Panel

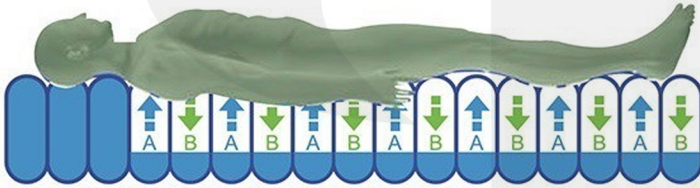

CPR for quick air release
in emergency



4-way stretch PU cover
with zipper closure

- 9" Height with 21 Air Cells
- Dimensions: 200 cm (L) x 90-138 cm (W) x 23.5 cm (H)
- Safety-Protected Foam Base
- PU Top Cover
- Comfortable Rectangular Air Cells (Optional)
- 4-Way Zipper
- Antibacterial Sheet
- Up to 67% AB Alternative Pressure Reduction (Optional)
- Ventilated
- 10-15-20-25 min fluctuation time setting
- Sitting position mode
- Static mode
- Transport module
- Handles for patient transfer
- Bed connection straps
- Valve system for optional tube removal
- Top 1-3 Air Cell Cushion Feature
- CPR for Rapid Evacuation in Emergencies
- Weight Capacity: 280-450 kg

- ABC Dual Air Pump with Alternate Operation
- Power Failure and Low Pressure Detection / Audible Alarm
- Lock/Mute Function
- Automatic Weight Control
- Static Nursing Mode, Returns to Alternate Operation after 30 minutes
- Sitting Position Provides More Support
- CPC Quick Connect Element and Removable 4M Cable
- Dimensions: 34.5 cm (L) x 19 cm (W) x 14.5 cm (H)

AXD 301 KOMPRESÖRLÜ NEBULİZER

Güç Kaynağı: AC 220V 50Hz
Güç: 130VA
Sıvı Kapasitesi: Max. ölçek çizgisine kadar
Partikül Boyutu (MMAD*): 2µm-5µm
Gürültü Seviyesi: ≤65dB
Ortalama Püskürtme Hızı: ≥0.2ml/dk.
Çalışma Basınç Aralığı: 60kPa~130kPa
Atık Sıvı: ≤0.7ml
İçerik: Kompresör, Nebulizatör Kiti,
Hava Borusu, 5 adet Yedek Filtre,
Maske, Kullanım Kılavuz



AXD 301 COMPRESSED NEBULIZER

Power Source: AC 220V 50Hz
Power: 130VA
Fluid Capacity: Up to max. scale line
Particle Size (MMAD*): 2µm-5µm
Noise Level: ≤65dB
Average Spray Rate: ≥0.2ml/min
Operating Pressure Range: 60kPa~130kPa
Waste Fluid: ≤0.7ml
Contents: Compressor, Nebulizer Kit,
Air Tube, 5 Spare Filters,
Mask, User Manual

AXD 302 KOMPRESÖRLÜ NEBULİZER

Güç Kaynağı: AC 220V 50Hz
Güç: 130VA
Sıvı Kapasitesi: Max. ölçek çizgisine kadar
Partikül Boyutu (MMAD*): 2µm-5µm
Gürültü Seviyesi: ≤65dB
Ortalama Püskürtme Hızı: ≥0.2ml/dk.
Çalışma Basınç Aralığı: 60kPa~130kPa
Atık Sıvı: ≤0.7ml
İçerik: Kompresör, Nebulizatör Kiti,
Hava Borusu, 5 adet Yedek Filtre,
Maske, Kullanım Kılavuz



AXD 302 COMPRESSED NEBULIZER

Power Source: AC 220V 50Hz
Power: 130VA
Fluid Capacity: Up to max. scale line
Particle Size (MMAD*): 2µm-5µm
Noise Level: ≤65dB
Average Spray Rate: ≥0.2ml/min
Operating Pressure Range: 60kPa~130kPa
Waste Fluid: ≤0.7ml
Contents: Compressor, Nebulizer Kit,
Air Tube, 5 Spare Filters,
Mask, User Manual

LT-N400 MESH NEBULIZER

2 yaşın üzerindeki hastalara inhalasyon için doktor tarafından reçete edilen solüsyonları aerosol haline getirmek üzere tasarlanmış ultrasonik titreşimli taşınabilir nebulizer sistemidir.

Bir ana ünite ve bir mikro USB kablosundan oluşur.
Ürün boyutu: 48(U) x 43 (G) x 107 (Y) mm
Ağırlık: Yaklaşık 87g (pil hariç)

LT-N400 MESH NEBULIZER

This is an ultrasonic vibrating portable nebulizer system designed to convert solutions prescribed by a doctor for inhalation into an aerosol for patients over 2 years of age.

It consists of a main unit and a micro USB cable.
Product dimensions: 48(W) x 43 (D) x 107 (H) mm
Weight: Approximately 87g (excluding battery)



PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE (PC-60 F)

- Gerçek zamanlı nabız ve kan içi oksijen satürasyonu ölçümü için kullanılır.
- Otomatik açılır/kapanır.
- SpO2, Nabız atışını rakam ve grafik olarak iki renkli ekranda gösterir.
- Ekran bulunulan konuma göre iki farklı açıdan gösterim yapabilir.
- Sadece 0,05 kilogramdır (piller dahil).
- Pil değiştirmeden aralıksız 30 saat ölçüm alabilir.
- Herhangi bir kablo ya da ek sensöre gerek duymaksızın anlık ölçüm yapar.
- Kauçuk yastığı sayesinde parmakta rahatsızlık yaratmaz.
- Koruyucu kılıfı ve kola bağlamak için kordonu paket içerisinde gelir.
- 2 adet AAA pille çalışır. Piller cihazla birlikte verilir.



FINGER TYPE PULSE OXYMETER (PC-60 F)

- Real time pulse rate and blood oxygen saturation measurement
- Dual-color display of SpO2, PR, Pulse Bar and & Plethysmogram
- Automatic shut-down
- Weighs only 0,05 kg (including batteries)
- Performs continuous 30 hours of real time measurement without changing the batteries
- Spontaneous measurement without need for an additional cable / probe
- Rubber cushion provides comfort to the patient
- Pulse rate in form of a histogram
- Inclusive storage bag and lanyard are in the original package
- Operates on 2 x AAA batteries, included in the package

PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE (JZK-303)

- Gerçek zamanlı nabız ve kan içi oksijen satürasyonu ölçümü için kullanılır.
- Yüksek çözünürlüklü geniş ekran
- Yüksek performanslı sensör
- Kaymalara ve çizilmelere karşı dayanıklı gövde
- Gerçek zamanlı görüntüleme ve otomatik alarm
- Herhangi bir kablo ya da ek sensöre gerek duymaksızın anlık ölçüm yapar.
- Oksijen saturasyonu : %36 - %99 ± %2
- 2 adet AAA pille çalışır.



FINGER TYPE PULSE OXYMETER (JZK-303)

- Real time pulse rate and blood oxygen saturation measurement.
- OLED screen display with high-definition
- High performance sensor
- The case with skid resistance and scratch resistance
- Real-time monitoring and automatic alarm
- Spontaneous measurement without need for an additional cable / probe
- Oxygen saturation : 36% - 99% ± 2%
- Operates on 2 x AAA batteries.

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER (HW-F7)

- İnsan vücudu için aralık: 34,0°C-43,0°C
- Nesne için aralık: 0°C-93°C
- Üç Renkli Aydınlatmalı Ekran
- C/F okuma özelliği
- 10 Hafıza
- Otomatik kapanma
- Pil seviyesi göstergesi
- Yüksek ateş için sesli alarm

INFRARED THERMOMETER (HW-F7)

- Range for human body: 34.0°C-43.0°C
- Range for object: 0°C-93°C
- Three Color Back-lit display
- C/F reading available
- 10 Memories
- Automatic switch off
- Battery level indication
- Buzzer for fever alarm



SABİT UÇLU DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER

Dijital derecelerin, geleneksel civalı olanlara kıyasla, çabuk okuma, hızlı tepki ve sonuç, güvenlik, doğru ölçüm ve sesli alarm gibi avantajları vardır. Civa içermediği için çevreye ve kullanıcıya zararı yoktur.

- Otomatik Hafıza özelliği
- Ölçüm Doğruluğu (+-0.1C)
- 1 Dakikada Okuma Özelliği
- Otomatik Kapanma
- Hızlı Ve Kolay Okunma
- Dayanıklılık
- Plastik koruma kutusu



DİJİTAL THERMOMETER

Digital clinical thermometers offer the advantages of being able to take readings in shorter times provides safety, more accuracy and audio alarm in comparison to conventional Mercury-Glass thermometers. Due to its mercury-free nature, it is risk-free both to the user or the environment.

- Automatic memory function
- Accuracy in the range of (+-0.1C)
- Automatic shut-off
- Durable, rapid and easy to read
- Offered in protective plastic container

ESNEK UÇLU DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER

- Otomatik Hafıza özelliği
- Esnek Uç
- Ölçüm Doğruluğu (+-0.1C)
- 1 Dakikada Okuma Özelliği
- Otomatik Kapanma
- Hızlı Ve Kolay Okunma
- Dayanıklılık
- Plastik koruma kutusu



DİJİTAL THERMOMETER FLEXIBLE

- Automatic memory function
- Flexible tip for ease of operation
- Accuracy in the range of (+-0.1C)
- Automatic shut-off
- Durable, rapid and easy to read
- Offered in protective plastic container



EL TİPİ PULSE OKSİMETRE

- Kandaki oksijen değeri ve gerçek zamanlı nabız sayısı ve yoğunluğu ölçümü için kullanılır.
- Profesyoneller için, yüksek doğrulukta ölçüm yapar.
- SpO2 ve Nabız değerlerini rakam ve grafik olarak yüksek çözünürlükteki ekranda gösterir.
- SpO2 ve Nabız değerlerini sonraki değerlendirmeler için PC bağlantısı ile bilgisayara yükleyebilirsiniz.
- Ayrıca, SpO2 trend eğrisini oksimetrenin bilgi yönetin software'inden görebilirsiniz.
- Detaylı alarm seçenekleri mevcuttur.
- 70 saate kadar oksimetri bilgilerini saklama kapasitesi vardır (1/2/4/8 saniyede bir ölçüm yapar)
- Yetişkin, çocuk, yeni doğan problemleri opsiyonel olarak kullanılabilir.
- 3 adet AA pille çalışır. Piller cihazla birlikte verilir.

HAND TYPE PULSE OXYMETER

- Oximeter PC-66 can monitor SpO2, Pulse Rate, Pulse Intensity
- It can store SpO2 and PR data, which can be uploaded to PC for further review and analysis
- Besides, it can be reviewed the SpO2 trend curves through the oximeter data manager software
- Professional, high precision
- High resolution LCD to display SpO2, PR, and plethysmogram
- Operates on 3 x AAA batteries, included in the package
- Detailed and adjustable alarm options available, both visible and audible

PULSE OKSİMETRE PROBU YETİŞKİN / ÇOCUK / YENİ DOĞAN TEK KULLANIMLIK / ÇOK KULLANIMLIK

PULSE OXIMETERE PROBE ADULT / CHILD / NEONATAL DISPOSABLE / REUSABLE



**GALENA - HİPOKRAT ANEROİD TİP TANSİYON ALETİ
STETESKOPLU (YETİŞKİN - COÇUK)**



**GALENA - HIPOKRAT ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER
WITH STETHOSCOPE (ADULT-PEDIATRIC)**

- Suitable for all home users as well as medical students
- Available in two cuff options; velcro or D-bar
- Fabric made of cuff
- Pediatric model with design cuff



**GALENA MASA ÜSTÜ MEKANİK TANSİYON ALETİ
GALENA DESKTOP ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER**



GALENA PERFECT TİP TANSİYON ALETİ STETESKOPLU

Profesyonel kullanım için kalibre edilebilir, güvenilir tansiyon aleti.

- 0-300 mmHg arası hassas ölçüm yapar.
- Manşon pamuk malzemeden mamüldür.
- Çift tüplü manşon bağlantısı vardır.
- Hızlı şişirme için iki yatay puar bağlantısı vardır.
- Kullanıcı cihazın kalibrasyonunu paket içerisindeki aparat ile kendisi yapabilir. (Sıfıra ayarlama)
- Tutamaçlar ve cihaz krom-nikel kaplıdır.

**GALENA PERFECT ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER
WITH STETHOSCOPE**

Designed for professional use with user calibration and high precision

- Precise measurement in 0-300 mmHg range
- Cotton Cuff
- Double tube bladder connection
- Two lateral connections to bulb for rapid inflation
- Calibration of device can be made by user with apparatus in the package (zero adjustment)
- Device and handle is Chrome-Nickel plated.



GALENA KOLDAN ÖLÇEN DİJİTAL TANSİYON ALETİ (AXD-808)

- Tam Sesli anons (kapatılabilir)
- HD geniş ekran
- Düşük voltaj uyarısı
- Düzensiz kalp atışı tespiti
- Ritim bozukluğu uyarısı
- Akıllı basınçlandırma
- Ortalama veri gösterimi
- Kan Basınç göstergesi
- Türkçe Konuşma
- Otomatik kapanma
- 2 Kullanıcı 90 Ölçüm
- Pilsiz, USB (Type C) kablosu ile ölçüm imkanı



GALENA ARM TYPE DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

- Full-Voice Announcement (can be turned off)
- HD widescreen display
- Low voltage warning
- Irregular heartbeat detection
- Arrhythmia warning
- Smart pressure compensation
- Average data display
- Blood pressure gauge
- Turkish voice prompts
- Auto shut-off
- 2 users, 90 measurements
- Battery-free, measurement via USB (Type C) cable

GALENA STETESKOPLAR - TEK TARAFLI / ÇİFT TARAFLI PEDIATRİK



GALENA STETHOSCOPES SINGLE / DOUBLE TYPES

Provides durability, comfort and accuracy with anodized aluminum 47 mm diameter head, chrome coating and plastic covered earpieces. Available in various colors.



Anode edilmiş alüminyumdan yapılmış 47 mm çapında başlığı, krom kaplama, uçları plastik kaplı kulaklığı ile dayanıklılık, rahatlık ve hassas ölçüm yapabilme özelliklerine sahiptir. Çeşitli renk alternatifleri mevcuttur.

GALENA DELÜKS TEK TARAFLI PASLANMAZ ÇELİK STETESKOP



GALENA DELUXE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE



- Steteskop başı paslanmaz çelikten üretilmiştir ve çanı düşük frekansları duyabilecek ekstra derinlikte dizayn edilmiştir.
- Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı aktarımı saklayacak kapasitededir.
- Özel olarak üretilmiş hortum yumuşak, dayanıklı ve esnektir, büküldüğünde kırılma yapmaz.
- Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu içerisinde ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.

- Chestpiece is made of stainless steel and extra deep bell for unsurpassed low frequency response.
- Sensitive diaphragm for greater amplification and crisper high frequency transmission.
- Custom molded tubing stays soft and flexible, spring construction reduces bulk and prevents kinking when folded.
- Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in the box.

GALENA LÜKS ÇİFT TARAFLI PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIKLİ STETESKOP



- Steteskop başı çiftlidir (dual) ve çelikten üretilmiştir ve çanı düşük frekansları duyabilecek ekstra derinlikte diyaframlıdır.
- Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı aktarımı saklayacak kapasitededir.
- Özel olarak üretilmiş hortum yumuşak, dayanıklı ve esnektir, büküldüğünde kırılma yapmaz.
- Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu içerisinde ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.

GALENA LUXE DUAL TYPE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE

- Chestpiece is dual type and made of aluminium alloy and extra deep bell for unsurpassed low frequency response.
- Sensitive diaphragm for greater amplification and crisper high frequency transmission.
- Custom molded tubing stays soft and flexible, spring construction reduces bulk and prevents kinking when folded.
- Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in the box.



Omuz ve Boyun Masaj Aleti

Profesyonel masaj aleti, boyun , omuzlar, sırt ve bel ağrılarını dindirir, yorgunluğu giderir rahatlatıcı özelliği vardır, hijyenik üründür. İnsan parmağı hissi uyandırarak kimseye ihtiyaç duymadan dilediğiniz kadar masaj yaptırma imkanı sunar.

- Şarjlı (Type-C)
- 2024 Yeni Nesil 4d Boyun Sırt Omuz Yoğurma Akupunktur Masajı.
- 3 farklı masaj modu
- 2 farklı masaj tekniği
- Düşük ve yüksek sıcaklıklı ısı seçeneği
- 5V, 10W, 1800 mAh batarya

Shoulder and Neck Massager

Professional massage tool, relieves neck, shoulders, back and waist pain, relieves fatigue, has a relaxing feature, is a hygienic product. It offers the opportunity to have as much massage as you want without needing anyone by giving the feeling of a human finger.

- Rechargeable (Type-C)
- 2024 New Generation 4d Neck Back Shoulder Kneading Acupuncture Massager.
- 3 different massage modes
- 2 different massage techniques
- Low and high temperature heat option
- 5V, 10W, 1800 mAh battery

A6 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
(A6 ELECTRIC WHEELCHAIR)

- Katlanabilir Çelik Gövde
- 250 Watt x 2 Motor Gücü
- 24 V 20 Amper Akü
- 120 Kg Taşıma Kapasitesi
- 12" Arka Tekerlekler
- 8" Ön Tekerlekler
- Elektromanyetik Fren
- 5 Kademe Hız Ayarı
- Kolay Çıkarılabilir, Bağımsız Şarj Özellikli Akü
- Ayarlanabilir Kolçak Yüksekliği

Kalınlaşma ve aşınma dirençli
Kauçuk pnömatik arka tekerlekler



Rubber pneumatic rear
Thickening and wear-resistance

Evrensel kumanda
(Universal controller)



Manuel Fren
(Manuel brake)

Katlanabilir Sırtlık

Sırtlık 180 derece katlanabilir,
daha geniş hareket alanı sağlar

Collapsible backrest

Backrest can fold down
180° provide larger
activity space



Manuel ve elektrikli mod arasında geçiş yapma

Pil gücünün tükenmesinden endişelenmeyin.
Büyük kapasiteli pil desteğine ek olarak,
manuel moda kolayca geçebilirsiniz.

Manual and electric mode to switch

Don't worry about a lack of battery
power at all times. In addition to large-capacity
battery escort, can easily switch manually

- Foldable Steel Frame
- 250 Watt x 2 Motor Power
- 24V 20 Amp Battery
- 120 kg Carrying Capacity
- 12" Rear Wheels
- 8" Front Wheels
- Electromagnetic Brake
- 5-Speed Speed Adjustment
- Easily Removable, Self-Charging Battery
- Adjustable Armrest Height

A8 LİTYUM PİLLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

(A8 LITHIUM BATTERY POWERED WHELLCHAIR)



Manuel ve elektrikli mod arasında geçiş yapma

Pil gücünün tükenmesinden endişelenmeyin. Büyük kapasiteli pil desteğine ek olarak, manuel moda kolayca geçebilirsiniz.

Manual and electric mode to switch

Don't worry about a lack of battery power at all times. In addition to large-capacity battery escort, you can easily switch manually

Tek adımda katlanabilir tasarım
(One-step folding design)



Ayak pedalları yukarı doğru çevrilebilir
(Foot pedals can be turned up)



KOLAY KONTROL
(EASY CONTROL)

Açma/kapama düğmesi
(On/Off button)

Korna düğmesi
(Horn button)

Yavaşlama düğmesi
(Deceleration button)

Hızlanma düğmesi
(Acceleration button)



- 45 cm koltuk
- alüminyum gövde
- 250W x 2 Motor
- 8*2PU kaplama ön tekerlek
- 12" sağlam arka tekerlek
- 120 kg taşıma kapasitesi
- 6 km/s hız
- Katlanabilir kol desteği
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir ayak desteği
- Katlanabilir özelliği ile kolay taşıma
- Boyun desteği ile daha fazla konfor
- Sağ ve sol el kullanımı için joystick
- Elektromanyetik fren sistemi ile güvenli sürüş
- 12 Ah Lityum pil
- 15 km (maks.) çalışma menzili
- Çift amortisör sistemi ile konforlu sürüş
- jel koltuk minder

- 45 cm chair
- Aluminum body
- 250W x 2 Motors
- 8*2PU inlay front wheel
- 12" solid rear wheel
- 120 kg carrying capacity
- 6 km/h speed
- Foldable arm support
- Adjustable and removable foot support
- Easy transportation with foldable feature
- More comfort with neckrest device
- Joystick for right and left hand use
- Safe driving with electromagnetic braking system
- 12 Ah Lithium battery
- 15 km (max.) operating range
- Comfortable ride with double shock absorber system
- gel seat cushion



DİĞER ÜRÜNLER

CPAP / APAP / BPAP MASKELERİ

Burun için yastıklı model, normal burun modeli ile ağız ve yüzü beraber kapatan tam yüz modelleri olarak üç model mevcuttur. Hastanın yüzüne göre orta boy ve büyük boy olmak üzere iki boyu vardır.




CPAP / APAP / BPAP MASKS

There are three models available: a padded model for the nose, a standard nose model, and full-face models that cover both the mouth and face. There are two sizes available: medium and large, depending on the patient's face.

CPAP / APAP / BPAP HORTUMU

CPAP / APAP / BPAP BREATHING TUBE

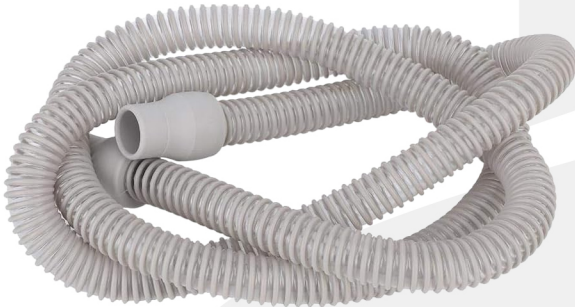

ÇOK KULLANIMLIK MUAYENE IŞIK KALEMİ

Fırçalanmış alüminyum gövde, aktif geçişli itme kilidi, gözbebeği göstergesi ve ölçeklidir. 2 adet AAA pil ile birlikte.



REUSABLE PENLIGHT

Brushed aluminum housing, Locking push toggle activated, Pupil gauge & scale ruler, 2 AAA batteries included.

LATEKS SICAK SU TORBALARI

Kokusuz doğal 1.sınıf lateksten imal edilmiştir. Yüksek ısı sığası sayesinde sıcaklığını uzun süre korur.

- Kılıfsız
- Kumaş kılıflı
- Yün kılıflı



LATEX HOT WATER BAGS

The product is made of 1st class natural latex. Preserves high temperature by high heat capacity.

- Bare
- Fabric covered
- Wool covered



GÖZ PEDI YETİŞKİN / ÇOCUK

Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrası, kornea zedelenmelerinde ve göz ameliyatları sonrası gözü korumak için kullanılır.

- Hava geçişine izin verir, sıvı geçişini engeller.
- Allerjenik değildir.
- Rahat kullanım ve tam koruma için oval şekillidir.

EYE PAD, ADULT / CHILD

Indicated to protect the eye after any injuries, corneal damage and postsurgery.


- Permeates vapor/air, prevents liquid from passing through
- Non-allergenic
- Ovally shaped for total an
- Comfortable coverage

SOĞUTUCU SPREY

- Mekanik-soğuk anestezi etkisiyle ağrı giderici olarak kullanılır.
- Hafif sakatlanmalar sonrası spor faaliyetlerine daha çabuk dönülmesini sağlar.
- Düşme, ezilme, burkulmalarda
- Travma sonrası ağrılı bölgelerde
- Küçük cerrahi girişimlerin öncesinde
- Spor yaralanmalarında

FREEZER SPRAY

- Used to relieve pain and accelerate the ambulation in full capacity after minor sports injuries.
- Falling, bruises, sprains
- Painful localities post-trauma
- Shortly before minor surgical interventions
- Sports injuries

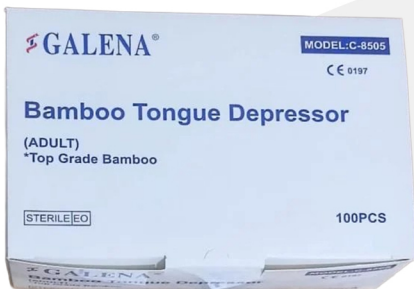

STERİL VE STERİL OLMAYAN DİL BASACAKLARI

Doktor muayenesinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli tahtadan üretilmiştir. Steril ve steril-olmayan iki çeşidi mevcuttur.



STERILE - NON STERILE WOODEN TONGUE DEPRESSORS

It is made of high-quality wood for use in doctor's examinations. It is available in sterile and non-sterile versions.



TENS ELEKTRODU

TENS cihazından gelen elektrik akımını cilde iletmek için kullanılan yapışkanlı pedlerdir. TENS cihazları, genellikle ağrı giderme amacıyla sinirleri uyarmak için düşük voltajlı elektrik akımları üretir.

TENS ELECTRODE

These are adhesive pads used to transmit the electrical current from the TENS device to the skin. TENS devices typically produce low-voltage electrical currents to stimulate nerves for pain relief.

EKG ELEKTRODU YETİŞKİN / ÇOCUK

EKG elektrotları, kalbin ritmi, hızı, elektriksel iletim bozuklukları, kalp kasında kalınlaşma veya hasar (kalp krizi geçmişi gibi) gibi durumların değerlendirilmesi ve teşhisi için hayati önem taşıyan EKG kaydının alınmasını sağlar



ECG ELECTRODE ADULT / CHILD

EKG electrodes enable the recording of an EKG, which is vital for evaluating and diagnosing conditions such as heart rhythm, rate, electrical conduction disorders, thickening or damage to the heart muscle (such as a history of heart attack).



ABR ELEKTRODU

İşitsel Beyinsapı Cevabı (ABR) testi sırasında, işitme sisteminin sese verdiği elektriksel yanıtları (aktiviteyi) kaydetmek için kullanılır.



ABR ELECTRODE

During the Auditory Brainstem Response (ABR) test, it is used to record the electrical responses (activity) of the auditory system to sound.

BİYOPSİ PUNCH

- Cilt biyopsisi almak için kullanılır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Boyutlar: 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6



BIOPSY PUNCH

- Used to take skin biopsies.
- Made of stainless steel.
- Sizes: 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6

KOLAY LANSET CİHAZI

Lanset cihazı, parmak ucundan veya avuç içi, üst kol ve ön kol gibi diğer alternatif bölgelerden kan örneği almak için tasarlanmıştır.

- Ağrısız kan numunesi alınmasına büyük ölçüde yardımcı olur.
- #1'den (en sıf) #8'e (en derin) kadar 8 delme derinliğine karşılık gelen 8 dişliye sahiptir.
- Tek adım ile aktive
- İstenmeyen tetiklemenin önüne geçer.



EASE LANCING DEVICE

The lancet device is intended for obtaining a blood sample from a fingertip or other alternate sites such as the palm, the upper arm and the forearm.

- It greatly facilitates painless blood sampling.
- It has 8 teeth corresponding to 8 puncture depths, from #1 (shallowest) to #8 (deepest).
- Activated in one step.
- Prevents unwanted triggering.

CİLT STAPLERİ

Stapler, Doku kapatma veya cilt kapatma için ve dikişlere ve iğnelere alternatif olarak kullanılabilir.

- Elverişli tasarım kolu operasyonları daha rahat, kolay ve pratik hale getirmektedir.
- Geleneksel dikişlerde yaranın iyileşmesi için dikişleri çıkarmaktan kaçınılmakta iken bu üründe atılan dikiş sonrası yara hızlı bir şekilde iyileşmeye başlamaktadır.
- Dikişi pürüzsüz bir şekilde doğru ve güvenli atmakta olup dikilmiş yarası düzgün ve güzel bir şekilde tutar. İyileşmeden sonra yara izi küçük ve hafiftir.
- Hastaların dikiş sürelerini ve ağrılarını azaltmaktadır.
- Tek kullanımlık steril tıbbi ürün geniş bir kullanım alanına sahip olup temiz, güvenli ve etkilidir.

SKIN STAPLER



Skin stapler can be used for tissue closure or skin closure and as an alternative to stitches and needles.

- Convenient design handle makes operations more comfortable, easy and practical.
- In traditional stitches, it is avoided to remove the stitches to heal the wound; However, while using the stapler the wound starts to heal quickly after the stitches.
- It throws the suture smoothly and safely and keeps the sutured wound neatly and nicely. After healing, the scar is small and light.
- It reduces the stitching time and pain of the patients.
- Disposable sterile medical product has a wide range of uses and is clean, safe and effective.

CİLT STAPLER SÖKÜCÜ



Cerrahi işlemler sırasında yara kenarlarını birleştirmek için kullanılan cilt zımbalarını (staples) vücuttan güvenli ve kolay bir şekilde çıkarmak için tasarlanmış özel bir tıbbi alettir.

SKIN STAPLER REMOVER

A specialized medical device designed to safely and easily remove skin staples used to close wound edges during surgical procedures.

KAN DURDURUCU STANDART / ANAL / DENTAL

Galenaspon sıkıştırılmış bir cerrahi hemostatik süngerdir, yüksek derecede saflaştırılmış nötr jelatin maddesinden üretilmektedir. Galenaspon geleneksel hemostatiklerin kullanılması zor veya kullanılamaz işlemlerinde ya da emilmesi zor olan malzemelerin kullanılmasının istenilmediği çeşitli cerrahi işlemlerinde kullanılmaktadır. İki kat sterilize edilmiş blister paketlere konulmuştur. Paket içinde gamma ışını sterilize edilir ve istenirse farklı ebatlarda sunulabilir. Galenaspon ağırlığından yaklaşık 40-50 misli fazla su emmektedir ve kanayan bölgeye kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Galenaspon tek tip gözenek yapısı ile uygun bir hemostatik işlemi garanti etmektedir. İn vivo'da yerleştirilince 3-4 hafta içerisinde tamamen emilmektedir. Galenaspon alerjik, immünojenik ve toksik değildir, apironeiktir ve EN ISO 10993 Nolu bio-uyumluluk standartlarına uygun bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

- Plastik Cerrahi
- Nöroşirürji
- Genel Cerrahi
- Cildiye
- Ağız ve Diş Cerrahi
- Jinekoloji
- Travma ve Ortopedi Anorektal Cerrahi
- Karın Cerrahi

HEMOSTATIC SPONGES STANDARD / ANAL / DENTAL

Galenaspon is a compressed surgical haemostatic sponge manufactured from highly purified neutral gelatin material for use in various surgical procedures, where traditional haemostatis in difficult or impractical and use of other non absorbable material is undesirable

Available in different convenient dimensions in Gamma sterilized forms with suitable double sterile blister packaging or pouches for special sizes.

Galenaspon absorbs approximately 40-50 times, its weight of water and adheres easily to the bleeding site. The uniform porosity of, it is completely absorbed within 3-4 weeks. Galenaspon is non toxic, non -immunogenic, non-pyrogenic and meets the biocompatibility requirements as per EN ISO 10993 standards.

INDICATIONS

- Plastic Surgery
- Neuro Surgery
- General Surgery
- Dermatology
- ENT and Dental Surgery
- Gynaecology
- Orthopaedics and Trauma Anorectal Surgery
- Abdominal Surgery



EXTASIA KONDOM

ISO 4074: 2002, WHO 1998 ve diğer dünya standartlarına uygun olarak Medikal Malzemeler Kalite Kontrol Sistemi (QMS) uygulaması ile Doğal Kauçuktan üretilir.

Her kondom hijyenik olarak dikdörtgen alüminyum folyo paketler içerisine yerleştirilmiş, 100'lük kutular halinde paketlenmiştir.

EXTASIA CONDOMS

Manufactured from natural rubber latex utilizing Medical Equipment Quality Management System (QMS) in accordance top ISO 4074:2002 and guidelines of WHO

Each condom is hygienically packaged in rectangular aluminum foil packets and packaged in boxes of 100.




GEBELİK ÖNLEYİCİ RAHİM İÇİ ARAÇ (SİRAL) Copper T 380/Cu 375

Güvenilir, risksiz çözüm



INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES (SPIRAL) Copper T 380 / Cu 375

- For long acting reversible contraception
- Reliable, risk-free solution

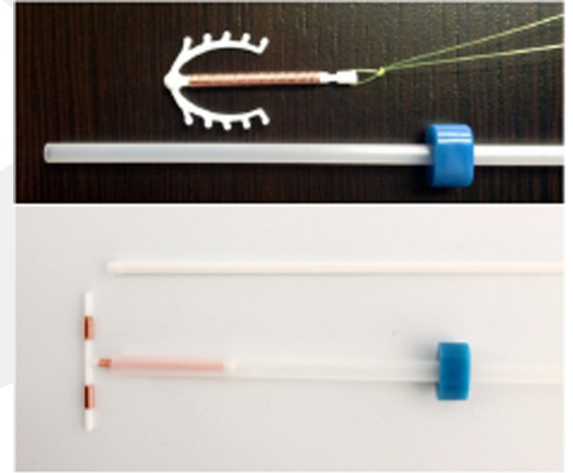



ELDİVENLER

PUDRALI VE PUDRASIZ TIBBİ AMAÇLI LATEKS MUAYENE ELDİVENİ



LIGHTLY POWDERED AND POWDER-FREE MEDICAL USE LATEX EXAMINATION GLOVES

- AQL 1,5 inspection level compliant high quality gloves
- Low water extractable protein content / Hypoallergenic
- Available in X-small to Large sizes



- AQL 1,5 medikal derecede tek kullanımlık eldiven
- Düşük protein seviyesi / Hipoalerjenik
- Extra Küçük (X-Small), Küçük (Small), Orta (Medium) ve Büyük (Large) boylarda mevcuttur.

PUDRALI VE PUDRASIZ NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ



POWDERED AND POWDER-FREE NITRILE EXAMINATION GLOVES

- A durable glove type that reduces the risk of allergies. Ideal for sensitive skin as it does not contain latex.
- Available in Small to X-Large sizes



- Dayanıklı ve alerji riskini azaltan bir eldiven türüdür. Lateks içermediği için hassas ciltler için idealdir.
- Küçük (Small), Orta (Medium), Büyük (Large) ve Extra Büyük (X-Large) boylarda mevcuttur.

PET (HDPE) ELDİVEN

Poşet eldiven olarak da bilinen bu model Standart, her ele uyabilen boyutta mevcuttur. Hassasiyet ve yüksek dayanım gerektirmeyen medikal dışı alanlarda kullanılır.



HDPE GLOVES FOR NON-MEDICAL USE

This model, also known as a bag glove, is available in a standard size that fits all hands. It is used in non-medical areas that do not require sensitivity and high durability.

STERİL CERRAHİ ELDİVEN (PUDRALI / PUDRASIZ)

Steril cerrahi eldiven, ameliyatlar ve invaziv tıbbi işlemler sırasında kullanılan, tek kullanımlık, mikroorganizmalardan arındırılmış (steril) eldivenlerdir. Sağlık personelinin hem hastayı hem de kendisini enfeksiyonlardan korumasını sağlar.

Özellikleri:

- Sterildir: Mikrop içermez, genellikle gama ışını, etilen oksit gazı veya buhar ile sterilize edilir.
- Çift el uyumlu değildir — yani sağ ve sol ele özel üretilir.
- Yüksek dokunma hassasiyeti sunar, bu da cerrahi müdahalelerde el becerisini destekler.
- Pudralı veya pudrasız olabilir (pudrasız olanlar alerji riskini azaltır).
- Genellikle çift kat kullanılır (özellikle ortopedik veya uzun süren ameliyatlarda).

Kullanım Alanları:

- Cerrahi operasyonlar
- Doğum müdahaleleri
- Bazı steril küçük cerrahi işlemler (örneğin dikiş atma)
- Laboratuvar işlemleri (yüksek riskli materyallerle çalışırken)

BOYUTLAR	ELDİVEN UZUNLUĞU ± 10 mm	AVUÇ İÇİ GENİŞLİĞİ ± 10 mm
5 ½	245	70
6	265	76
6 ½	265	83
7	265	89
7 ½	265	95
8	265	102
8 ½	265	108
9	265	115



STERİL SURGICAL GLOVES (POWDER / POWDER FREE)

Sterile Surgical Gloves are single-use gloves used during surgeries and invasive medical procedures. They are sterile, meaning they are free from microorganisms, and help protect both the healthcare provider and the patient from infections.

Features:

- Sterile: Free from microorganisms, usually sterilized by gamma rays, ethylene oxide gas, or steam.
- Hand-specific — designed separately for the right and left hands.
- Provide high tactile sensitivity, which supports manual dexterity during surgical procedures.
- Available in powdered or powder-free versions (powder-free reduces the risk of allergic reactions).
- Often used in double layers, especially in orthopedic or long-duration surgeries.

Usage Areas:

- Surgical operations
- Obstetric procedures
- Certain minor sterile procedures (e.g., suturing)
- Laboratory work involving high-risk materials

SIZES	GLOVE LENGTH ± 10 mm	PALM WIDTH ± 10 mm
5 ½	245	70
6	265	76
6 ½	265	83
7	265	89
7 ½	265	95
8	265	102
8 ½	265	108
9	265	115



SOLUNUM

SİLİKON SUNİ SONULUM (AMBU) SET

- Saf, şeffaf, dayanıklı silikondan yapılmıştır, lateks içermez.
- Tüm parçalar kolayca temizlenebilir ve dezenfeksiyon için kolayca sökülebilir.
- Silikon resusitator, çanta ve silikon yüz maskesi 134°C'de defalarca sterilize edilebilir.
- Tüm boylarda basınç tahliye valfi bulunur.



SILICONE RESUSCITATOR (AMBU) SET

- Made of pure, transparent, durable silicone and latex-free.
- All parts are easy to clean and can be easily disassembled for disinfection.
- The silicone resuscitator, bag, and silicone face mask can be sterilized repeatedly at 134°C.
- All sizes include a pressure relief valve.



PVC SUNİ SOLUNUM (AMBU) SET

- Tek kullanımlık olması sebebiyle temizlik, dezenfektasyon ya da sterilizasyon gerekli değildir.
- Dokulu yüzeyi ergonomik bir tutuş sağlar.
- Tüm boylarda basınç tahliye valfi bulunur.
- Lateks içermez.



PVC RESUSCITATOR (AMBU) SET

- Disposable due to cleaning, disinfection or sterilization is not required.
- Textured surface provides an ergonomic grip.
- All size located in the pressure relief valve.
- Does not contain latex



YASTIKLI PVC AMBU MASKESİ PVC RESUSCITATOR MASK



SİLİKON AMBU MASKESİ SILICONE RESUSCITATOR MASK




**NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN/ÇOCUK
NASAL OXYGEN CANNULA ADULT/CHILD)**



**NEBULİZASYON HAZNELİ OKSİJEN MASKESİ
YETİŞKİN / COÇUK
NEBULISATION CHAMBER OF OXYGEN MASK
ADULT / CHILD**



**OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN / ÇOCUK
OXYGEN MASK ADULT / CHILD)**

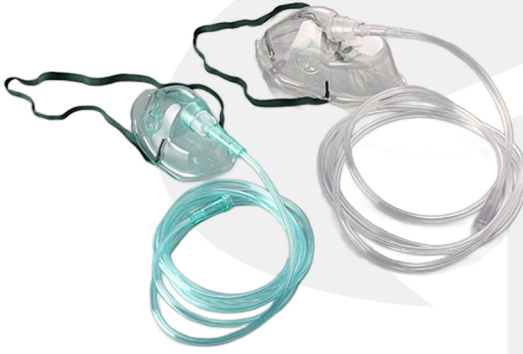

**CPR MASKESİ
CPR MASK**



GALENA OKSİJEN REGÜLATÖRÜ

Yüksek basınçlı oksijen tüpünden gelen oksijen gazının debisinin ayarlanıp nemlendirilerek hastaya verilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Şeffaf nemlendirici hazne sayesinde su seviyesi izlenebilir.

- 3.5 - 4 Kg/cm² sabit basınç
- Tüpteki oksijen gazını izleme olanağı
- 0-10 Lt/dk arasında ayarlanabilir gaz akışı
- 0-15 Lt/dk arasında ayarlanabilir gaz akışı
- Cihaz içerisinde koruyucu filtre (50 µm)
- Nemlendirici içerisinde koruyucu filtre (100 µm)
- EN 738-1 standardına uygun
- Nemlendirici kap su hacmi : 150ml

GALENA OXYGEN REGULATOR

Adjusted the flow of high-pressure oxygen gas from the oxygen tube is designed to be given to patients moistened. The water level can be monitored through transparent humidifier chamber.



- 3.5 - 4 Kg/cm² constant pressure
- Oxygen gas in the tube watching nearby
- 0-10 L / min adjustable gas flow
- 0-15 L / min adjustable gas flow
- Protective filter in the appliance (50 µm)
- Protective filter in the humidifier (100 µm)
- According to EN 738-1 standard
- Humidifier Water Container Volume : 150ml



TRANSFÜZYON

I.V. KANÜL

Kanül: İnsan vücuduna en az yan etkisi olan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluro Ethylene)den üretilmiştir. PTFE kanül konik hale getirilmiş, ucu sivriltilmiş ve silikonize edilmiştir. Bu sayede kanül vücutta kolayla ilerler. İnce çeperli kanül, en fazla sıvı akışını sağlar. İğnenin ucu ile kataterin ucu arasında optimum mesafe bırakılmıştır.


İğne: Paslanmaz çelik iğne en yüksek lazer teknolojisi ile sivriltilmiş, vücuda kolay ve ağrısız girmesi için silikon ile kaplanmıştır.

İğne Habi: Özel olarak dizayn edilmiş iğne habi (needle hub), harekete engel olur, daha iyi tutuş ve kontrol sağlar. Özel parmak eğimi sayesinde vücuda girişte uygun pozisyon sağlar.

İğne Koruyucu: İğneyi, herhangi bir bulaşmaya veya hasara karşı korur.

Hava Giriş Habi: Yüksek akış hızı sağlar, damara doğru girişi teyit eder. Kan akışına engel olur. Hava kabarcığı oluşumunu engeller.

Blister Paket: Her I.V. Kanül bir tarafı medikal folyo, bir tarafı yüksek kalite medikal kağıt olan sağlam bir blister pakete konulmuştur.

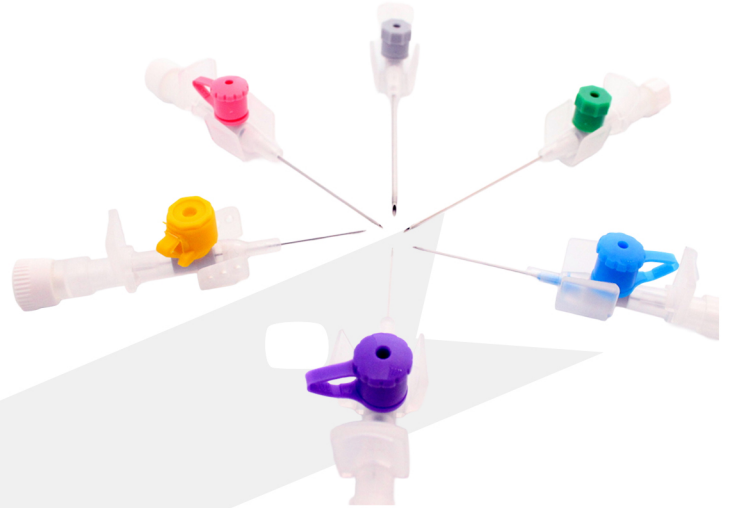

I.V. CANNULA

Cannula: Made from P.T.F.E (Poly Tetra Fluro Ethylene) material which has minimum side effects on human body. The PTFE Cannula has a conical form and the end is shaped and siliconised. With all these features the cannula can easily penetrate the body. Fine cannula assures a maximum liquid flow. There is an optimum distance between catheter and needle ends.

Needle: Stainless steel needle, shaped with the latest laser technology, silicon plated to allow a easy and painless body penetration.

Needle Hub: Specially designed needle hub, prevents movement, assures fixation and control. With a finger incination feature, provides adequate body penetration position.


Needle protector: Protects the needle against any damage and contamination.

Air Entry Hub: Assures high flow speed, confirms the veine entry. Prevents blood to flow out, air bubble formation.

Blister Pack: Every IV cannula is packed in a solid blister pack made of high quality medical paper on one side and medical folio on the other side.

SERUM SETİ LUER SLIP / LOCK

- Bakteri filtreli hava yollu giriş
- Bükülme ve kırılmalara dayanıklı medikal grade PVC hortum
- 21G iğne
- Sürekli ve düzenli akış kontrol mekanizması

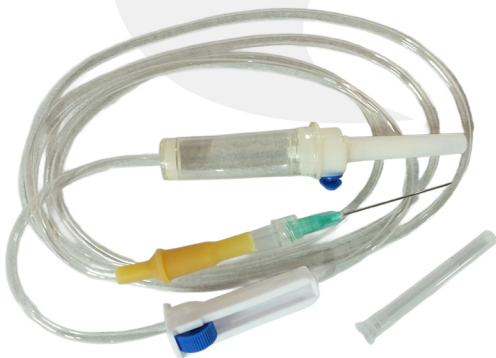


SERUM INFUSION SET LUER SLIP/LOCK

- Bacteria filtered air way entry
- Resistant to bending and breaking medical grade PVC tubing
- 21G needle
- Continuous and regular flow control mechanism.

KAN VERME SETİ

- Sürekli ve düzenli akış kontrol mekanizması
- Bükülme ve kırılmalara dayanıklı medikal grade PVC hortum
- Kan filtreli esnek damlama odası
- Bakteri filtreli hava yollu giriş
- 18G iğne

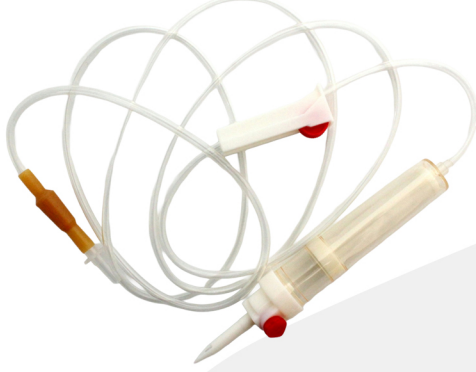

BLOOD TRANSFUSION SET

- Continuous flow control mechanism
- Made of medical grade pvc tube with structure preventing strain and break.
- Blood filter flexible dripping chamber
- Bacterial filter, air admission way
- 18G needle

I.V. BÜRET SET 150ml

Büretler sıvıları dağıtmak için kullanılır. Manuel büretin alt kısmında bir musluk veya vana ile, uzun bir ölçü tüpü bulunmaktadır.



I.V. BURETTE SET 150ml

Burettes are used for precisely dispensing liquids in laboratory experiments. Manual burettes (burets) are tall graduated tubes, with a tap or stopcock at the bottom.

Tek kullanımlık İnfüzyon Pompası Dozaj Kontrollü Tüp

Ayaktan tedaviye imkan sağlar. Çalışması için ekstra bir güce ihtiyacı yoktur. Silikon rezervuarın esnekliğinden faydalanarak çalışır. Dolum valfi; tek yönlüdür. İçerisinde sıvıyı geri çekmek için, set içerisinde bulunan aparat kullanılır. Rezervuar içerisindeki koruyucu silikonun zarar görmesini engeller.

Tip:CBI

- 100ml hacim 2ml/saat akış hızı
- 100ml hacim 4ml/saat akış hızı
- 275ml hacim 2ml/saat akış hızı
- 275ml hacim 5ml/saat akış hızı olmak üzere seçenekleri bulunmaktadır.

Single-use Infusion Pump Dose-Controlled Tube

It allows for outpatient treatment. It does not require any extra power to operate. It works by utilizing the flexibility of the silicone reservoir. The filling valve is one-way. The apparatus included in the set is used to withdraw the liquid inside. It prevents damage to the protective silicone inside the reservoir.

Type: CBI

- 100ml capacity, 2ml/hour flow rate
- 100ml capacity, 4ml/hour flow rate
- 275ml capacity, 2ml/hour flow rate
- 275ml capacity, 5ml/hour flow rate options are available.



IŞIK KORUMALI (LIGHT-PROTECTED)





ÜROLOJİ

LATEKS FOLEY SONDA 2 / 3 YOLLU

- Kısa/uzun süreli idrar drenajı için kullanılır.
- Silikon kaplı doğal lateksten üretilmiştir.
- X Ray opaktır.
- İç ve dış yüzeyi pürüzsüzdür.
- Homojen olarak şişen yumuşak balon (kaf) bulunmaktadır.

ÖLÇÜ										
FR	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Renk Kodu	Siyah	Gri	Beyaz	Yeşil	Turuncu	Kırmızı	Sarı	Menekşe	Mavi	Pembe



LATEX FOLEY CATHETER 2 / 3 WAY

- Used for short/long term urine drainage
- Made from natural latex, silicone coated.
- X Ray is opaque.
- Internal and external surfaces are smooth.
- Balloons are homogeneous, soft bottle.

SIZES										
FR	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Colour Code	Black	Grey	White	Green	Orange	Red	Yellow	Voilet	Blue	Pink

SİLİKON FOLEY SONDA 2 / 3 YOLLU

- Steril %100 medikal silikonlu,
- Yüksek dayanıklılığı yırtılmaları ve kırılmaları önler,
- Temiz ve kaliteli silikon drenajın gözlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.
- Yumuşak,kıvrılma ve bükülme önleyen bio uyumlu silikon hastanın rahat etmesini sağlar.
- X Ray opak çizgilidir.
- Homojen olarak şişen yumuşak balon.
- Yuvarlatılmış uçlar ve yumuşatılmış gövde, yerleştirme ve geri çıkartma sırasında travmayı en aza indirir.

ÖLÇÜ											
FR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Renk Kodu	Açık Mavi	Siyah	Gri	Beyaz	Yeşil	Turuncu	Kırmızı	Sarı	Menekşe	Mavi	Pembe



SILICONE FOLEY CATHETER 2 / 3 WAY

- 100% Silicone Foley Catheter Sterile Medical
- High Strength Tear and prevents breakage.
- Drainage clean and high quality silicone ensures the observation and control.
- Sof,curling and bending Preventing Bio-compatible Silicon
- Ensures patient comfort.
- X-Ray Opaque Stripe
- Balloons are homogeneous, soft boottle,
- Rounded edges and softened housing,placement and minimize trauma during stickers are back.



SIZES											
FR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Colour Code	Light Blue	Black	Grey	White	Green	Orange	Red	Yellow	Voilet	Blue	Pink

SİLİKON 3 YOLLU HEMATURIA SONDA



ÖLÇÜ	BALON HACMİ	RENK KODU
FR	ML/CC	
18	50/50-60	Kırmızı
20		Sarı
22		Menekşe
24		Mavi

- %100 medikal sınıf silikondan yüksek bio-uygunluk amacıyla üretilmiştir.
- Saydam tüp sıvı akışının izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.
- X-Ray opak çizgi, yerleştirmenin doğru olarak yapıldığını teyit etmek için kullanılır.
- Homojen olarak şişen yumuşak balon, tüpün mesaneye oturmasını sağlar.
- İkili steril paketler içerisinde.



COUDE YUVARLAK UÇ (COUDE ROUND TIP)



SIZE	BALLOON VOLUME	COLOR CODING
FR	ML/CC	
18	50/50-60	Red
20		Yellow
22		Violet
24		Blue

SILICONE 3 WAY HEMATURIA CATHETER

- 100% medical grade silicone for superior biocompatibility.
- Transparent tube allows easy visual inspection and fluid observation.
- X-ray opaque line allows intubating location confirmation.
- A soft and uniformly inflated larger volume balloon makes the tube sit well against the bladder.
- Sterilized double packaging.

PREZERVATİFLİ SONDA (U -DREN)

Erkek hastalarda mesaneye yerleştirilen kataterlere birçok durumda alternatiftir. Özellikle yataktan kalkamayan, idrarını kontrol etmekte sorun yaşayan, periyodik ve sık olarak idrarını boşaltmak zorunda olan hastalarda kullanılır. Uygulanması çok kolaydır ve hastanın kendisi de kullanabilir. Yumuşak ve hafif dış çeperler sıkma ve yara oluşumuna engel olur.

- Güçlendirilmiş huni bölgesi kırılma ve katlanmalara engel olur.
- Uzun drenaj hortumu ve geniş hortum çapı, maksimum drenajı sağlar. Bütün standart idrar torbalarına ve kaplarına uygundur.
- Elastik köpükten yapılan yapışkan bant kataterin yerinden çıkmasını sağlar ve geriye akışa engel olur.
- Rahatsızlıklara engel olmak için özel olarak hazırlanmış kauçuk, bütün olası kimyasalları arıtmak için sıcak su ile hassasiyetle yıkanmaktadır.
- Uzun süre rahatça kullanılabilir.

SİLİKON PREZERVATİFLİ SONDA (U -DREN)



%100 Silikondan imal edilmiştir.



PRESERVATIVE CATHETER

(U-DRAIN-Male Incontinence Device)

Used in many cases on male patients as alternatives of other catheters. Especially to patients in laying position, those who can not control their urines and those who have to evacuate their urines often and periodically.

Smooth and light external surfaces to avoid lesions.

- Reinforced parts to avoid breaks and folds.
- Long and wide drainage tube, to enable a maximum drainage. Compatible with all standards of urine bags and caps.
- Special elastic stick band to stabilize the position of catheter and to avoid a reverse drainage.
- Made of special latex, cleaned by hot water from all possible chemical substances, to avoid certain indispositions to the patient.
- Can be used during a long period.


İDRAR TORBALARI

İdrarın vücut dışına tahliye edilmesini ve geçici olarak depolanmasını sağlayan steril bir torbadır. İdrarı dışarı sızdırmadan toplar ve hastanın konforunu artırır.

- Malzeme: Medikal PVC
- Kapasite: 2000ml
- Musluk:T ve PP
- Geri dönüşü engelleme valfi mevcuttur.

Bacağa Bağlanabilen İdrar Torbası

* Kapasite:500ml

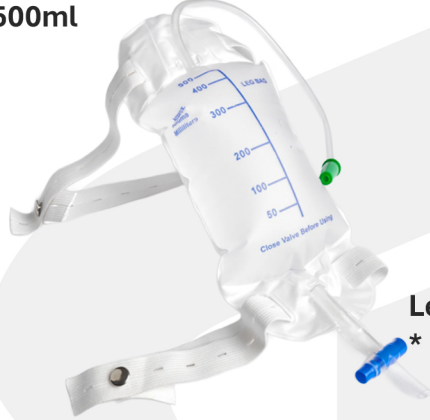

Leg Connected Urine Bag

* Capacity:500ml



URINE BAGS

It is a sterile bag that facilitates the drainage of urine from the body and its temporary storage. It collects urine without leakage and enhances the patient's comfort.

- Material: Medikal PVC
- Capacity: 2000ml
- Faucet:T and PP
- Engel Return valve clearance Available

ÜROMETRE

- Tıbbi sınıf Polivinil Klorür (PVC) ML ölçülü
- 2000ml kapasiteli idrar torbası, 500ml kapasiteli plastic odacık.
- Hidrofobik bakteri filtresi ile havalandırma. Anti-reflü vanalı.
- "T" tipi alt çıkış vanası. 2 slayt kepelçeli. İğnesiz örnekleme portu.
- By-pass sistemi ile taşma engeli vardır. Geniş delikli ve kink oluşmasını engelleyici boru özellikli.
- İdrar torbası askısı, esnek bağlama ipli.

UROMETER

- Medical Grade Polyvinyl chloride (PVC), Graduated in ml.
- 2000ml capacity urine bag. 500ml capacity urine plastic chamber.
- Air vent with hydrophobic bacteria filter. Anti-reflux valve
- "T" type bottom outlet, 2 slide clamps, needleless sampling port
- By-pass system prevents overflow, wide bore kink resistant tubing.
- Built in urine bag hanger, flexible fastening strings.

